


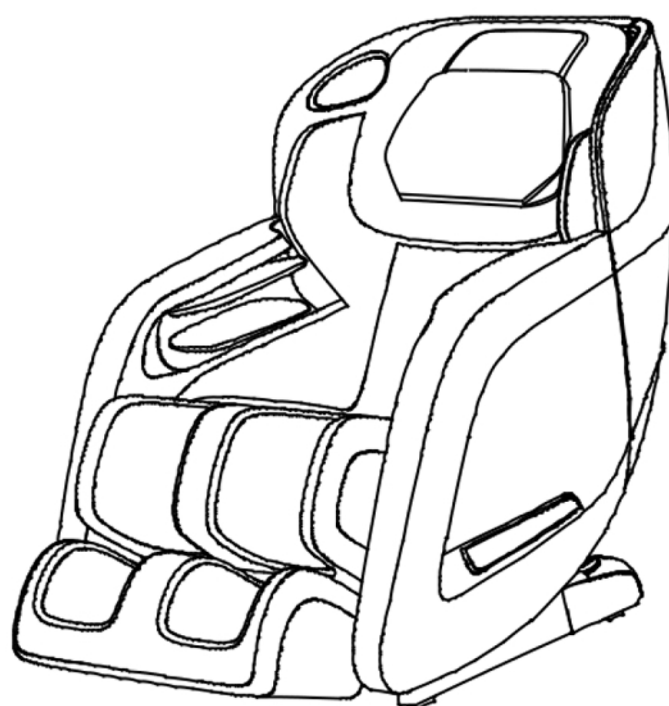

Masažna fotelja

ARCUS
AMBASADOR

Zahvaljujemo na kupovini naših proizvoda. Pre upotrebe, molimo Vas da pročitate pažljivo ova uputstva kako biste osigurali ispravnu instalaciju i rad. Molimo, čuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.

SADRŽAJ

MERE OPREZA	1
NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE	3
Spoljna struktura	3
Unutrašnja struktura	3
Kutija za napajanje	4
Daljinski upravljač	5
Uputstva za daljinsko upravljanje	6
Uputstva za MENU na ekranu	7
Instalacija aplikacija	11
PRELIMINARNE PROVERE	13
Uputstva za masažnu jedinicu za noge	13
Instalacija	13
Puštanje u rad	15
Provera pre upotrebe	15
Premeštanje	15
Povezivanje sa napajanjem	15
Prostor za instalaciju	16
Podna zaštita	16
Optimalno okruženje	16
Uzemljenje	16
ČUVANJE I ODRŽAVANJE	17
REŠAVANJE PROBLEMA	18
SPECIFIKACIJA	19

U obrascu ispod prikazuju se naziv i sadržaj opasnih materija u ovom proizvodu

Naziv delova	Ograničene supstance					
	Pb	Hg	Cd	Cr	PBB	PBDE
Spoljne ploče	○	○	○	○	○	○
Ploča	×	○	○	○	○	○
Metalne obrade	×	○	○	○	○	○
Gumeni delovi	○	○	○	○	○	○
Kabl za napajanje Adapter za napajanje	×	○	○	○	○	○
Interna signalna žica	○	○	○	○	○	○
Tapacirung	○	○	○	○	○	○
Ovaj obrazac je napravljen prema uredbi SJ/T 11364 ※ : Sklop ploče uključuje rezervne delove koji čine celu matičnu ploču, kao što su otpornik, kondenzator, integrisano kolo, konektori itd. ○ : Označava da je koncentracija opasnih materija u svim homogenim materijalima u delovima ispod odgovarajućeg praga GB/T26572 standarda. ×						

Napomene:

Rok trajanja ovih električnih i elektronskih proizvoda, ako se koriste kako je navedeno u uputstvu ograničen je na 10 godina.



MERE OPREZA

Mere opreza

- Dole navedene mere predostrožnosti će vam pomoći da obezbedite pravilnu upotrebu ovog uređaja.
- Opasnost koja može nastati nepravilnom upotrebom klasifikovana je u OPREZ i PAŽNJA.

 OPREZ	Nepravilna upotreba može izazvati povrede korisnika.		
 PAŽNJA	Nepravilna upotreba može izazvati oštećenje proizvoda.		
	Zabranjeno		Ne rasklapati

Rizični korisnici

Preporučujemo da se osobe, sa bilo kojim od sledećih stanja pre upotrebe konsultuju sa lekarom.

 UPOZORENJE	◆ Osobe koje imaju elektronski medicinski uređaj ugrađen u telo, kao što je pejsmejker za srce. ◆ Osobe koje su pod bilo kakvom terapijom, posebno ako se ne osećaju dobro. ◆ Osobe sa malignim oboljenjima.(koje su pod nadzorom) ◆ Žene koje su u ciklusu ili u drugom stanju. ◆ Osobe koje boluju od osteoporoze ili preloma kičme. ◆ Osobe koje boluju od kožnih bolesti ◆ Osobe koje imaju visoku temperaturu ◆ Neophodan je strog nadzor kada ovaj proizvod koriste, ili su u njegovoj blizini deca i osobe sa invaliditetom.
---	---

Mere predostrožnosti za daljinsko upravljanje

 PAŽNJA	◆ Nemojte rukovati daljinskim upravljačem niti povlačiti kabl vlažnom rukom. ◆ Kako biste izbegli kvar, ne prosipajte vodu ili drugu tečnost na upravljač. ◆ Ne stavljajte teške predmete na daljinski upravljač.
---	---

Upozorenja u vezi sa adapterima i kablom

PAŽNJA	◆ Proverite da li podaci na nalepnici sa navedenim napajanjem odgovaraju vašem lokalnom Napajanju el. energijom. ◆ Ne iskopčavajte kabl vlažnom rukom kako biste izbegli strujni udar. ◆ Ne vucite kabl pri isključivanju, dohvatite prednji plastični deo kako biste ga iskopčali. ◆ Ne pritiskajte, ne savijajte, ne vucite i ne uvrćite kabl. ◆ Držite kabl dalje od grejnih površina. ◆ Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, proizvođač serviser ili jednako kvalifikovana osoba mora ga zameniti kako bi se izbegla opasnost.
---------------	---

MERE OPREZA

Najbolje okolnosti

 PAŽNJA	◆ Ne koristite uređaj u okruženju gde je temperatura iznad 40°C. ◆ Ne koristite uređaj u vlažnom ili prašnjavom okruženju, niti kada je bilo koji deo tela u kontaktu sa vodom ili bilo kojim sličnim tlom. ◆ Ne koristite uređaj na otvorenom. ◆ Povežite uređaj samo sa pravilno uzemljenom utičnicom. Pogledajte uputstva za uzemljenje. ◆ Molimo vas da postavite uređaj na ravnu površinu. ◆ Ne čuvati uređaj u blizini izvora grejanja ili otvorenog plamena.
--	--


Saveti za bezbednu upotrebu

 PAŽNJA	◆ Predviđeno za težinu korisnika ispod 120kg. ◆ Koristite ovaj uređaj samo za predviđenu upotrebu kako je opisano u ovom uputstvu. ◆ Ne koristite proizvod u terapijske svrhe. ◆ Uređaj može koristiti samo jedna osoba, a ne dve ili više osoba istovremeno kako bi se izbegla oštećenja. ◆ Nemojte koristiti uređaj odmah nakon obroka, može izazvati nelagodnost. ◆ Uklonite nakit sa ruku i ispraznite džepove dok koristite usluge masaže. ◆ Proverite tapacirung ispod jastuka i drugih mesta, ako uočite oštećenja nemojte koristiti uređaj već se obratite kvalifikovanom servisu. ◆ Ukoliko tokom korišćenja uređaja osetite bilo kakvu neuobičajenu nelagodnost odmah isključite uređaj i nemojte ga koristiti. ◆ Preporučuje se upotreba uređaja u trajanju od 20min. ◆ Uverite se da ima dovoljno prostora iza i ispred masažne stolice pre podešavanja naslona za leđa i noge. ◆ Uverite se da osim korisnika ništa drugo ne vrši prekomerni pritisak na naslon za leđa i noge. ◆ Kada spuštate naslon za noge ili leđa uverite se da mala deca nisu u blizini. ◆ Molimo vas da sedite pravilno prilikom korišćenja uređaja. ◆ Ne vucite uređaj po parketu ili sličnoj površini kako biste izbegli njeno oštećenje.
 ZABRANJENO	◆ Ne naslanjajte teške predmete na naslon za noge ◆ Deca uvek moraju biti pod nadzorom kad su u blizini masažne stolice. ◆ Nemojte zaspati u masažnoj stolici dok radi. ◆ Ne konzumirajte alkohol prilikom upotrebe uređaja. ◆ Ne ubacujte prste ili bilo koji drugi predmet u otvore na uređaju. ◆ Ukoliko prilikom korišćenja uređaja osetite dim ili neki neprijatan miris, prekinite dalje korišćenje i isključite kabl za napajanje iz zida.
 NE RASKLAPATI	◆ Ne rastavljajte proizvod sami kako biste izbegli kvar. ◆ Ne radite demontažu, popravke i modifikacije na svoju ruku već kontaktirajte ovlašćenog prodavca.
	◆ Pre čišćenja i održavanja izvucite kabl za napajanje iz utičnice. Nikada ne uzimajte kabl za napajanje mokrom rukom ◆ Isključite kabl za napajanje iz utičnice ukoliko se uređaj ne koristi.




NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE

Spoljašna struktura

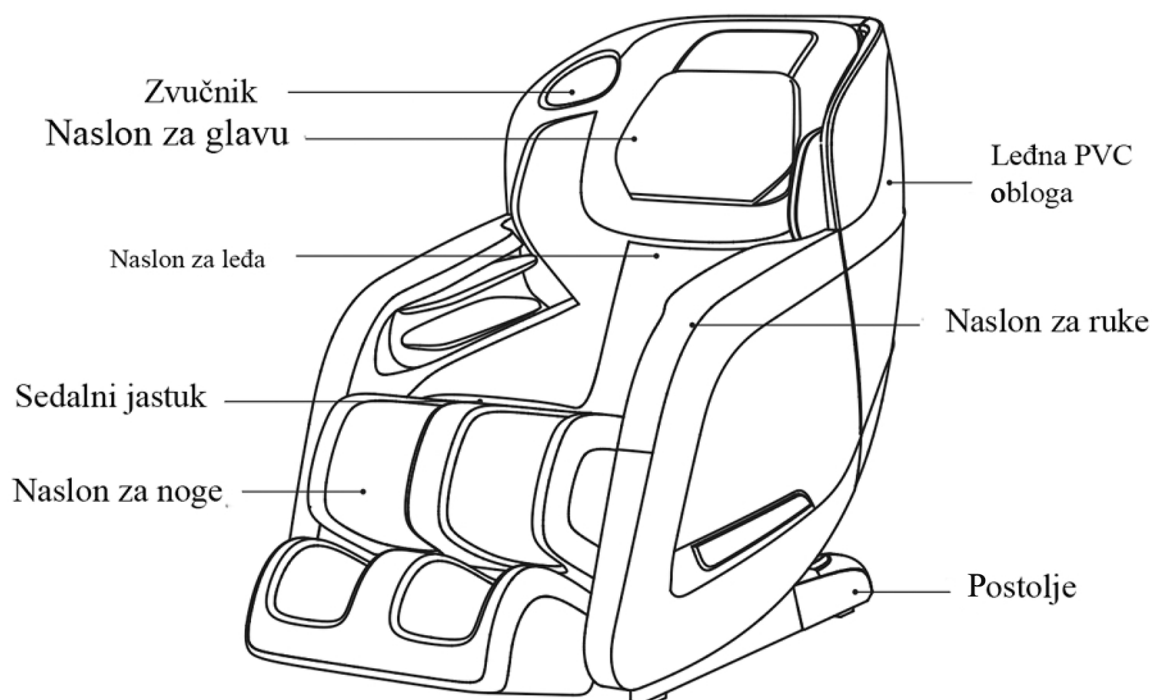


Unutrašnja struktura

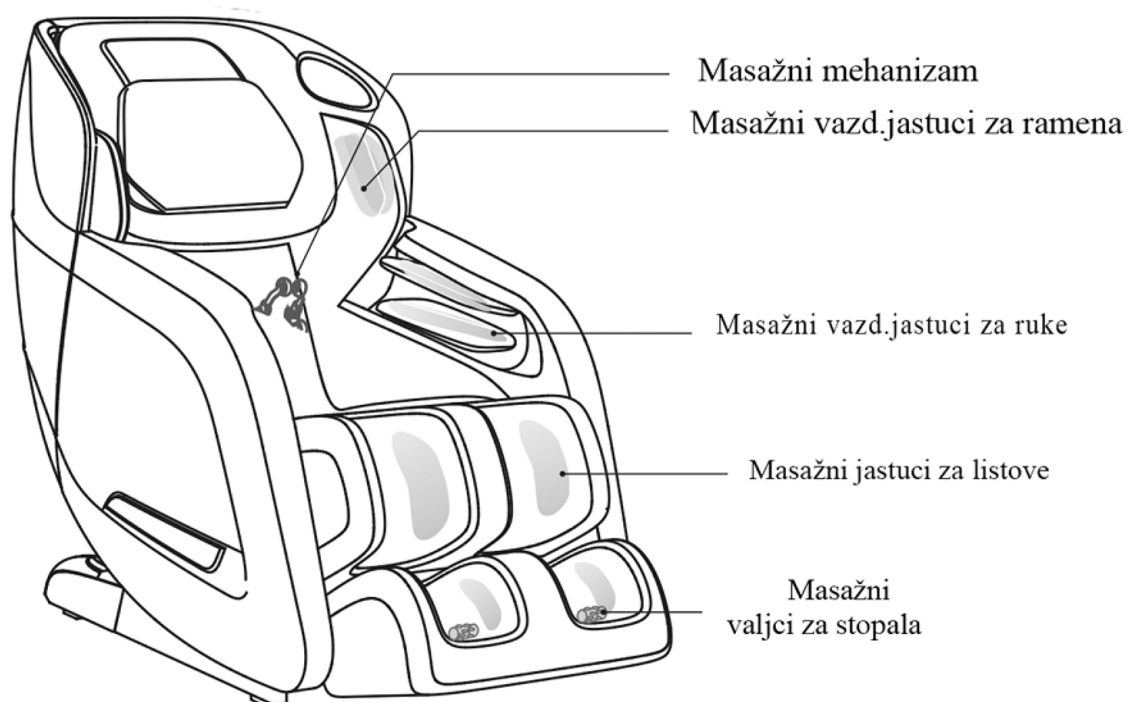

▶ NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE

Kutija za napajanje

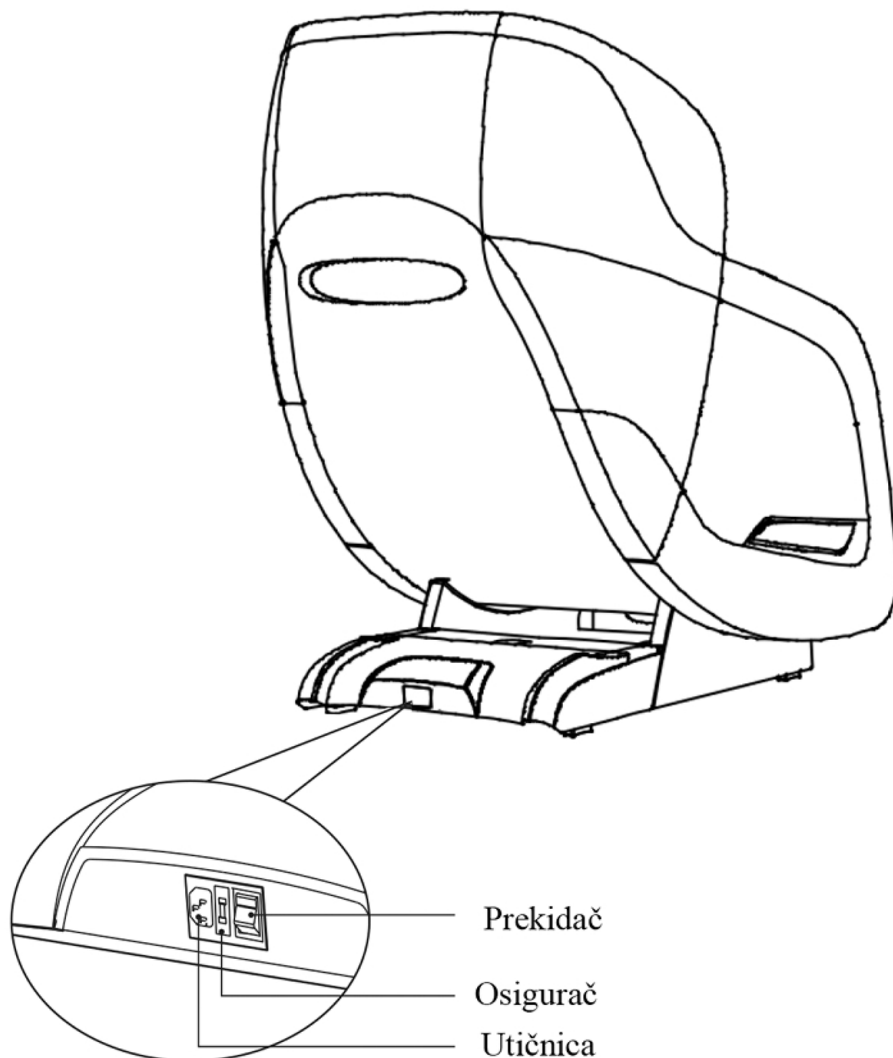


PAŽNJA

- ▶ Potrebno je decu držati pod nadzorom kako se ne bi igrali sa masažnom stolicom i kako ne bi dodirivali kutiju za napajanje.
- ▶ Uvek isključite masažnu stolicu iz utičnice odmah nakon upotrebe.
- ▶ Isključite kabl za napajanje iz zida tokom oluje sa grmljavinom i ostalih vremenskih nepogoda.
- ▶ Isključite kabl za napajanje iz zida kako biste sprečili decu da koriste uređaj.
- ▶ Ukoliko uređaj ne planirate koristiti duži vremenski period, preporučljivo je da isti prekrijete i odložite u prostor bez vlage i prašine.

▶ NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE

Daljinski upravljač

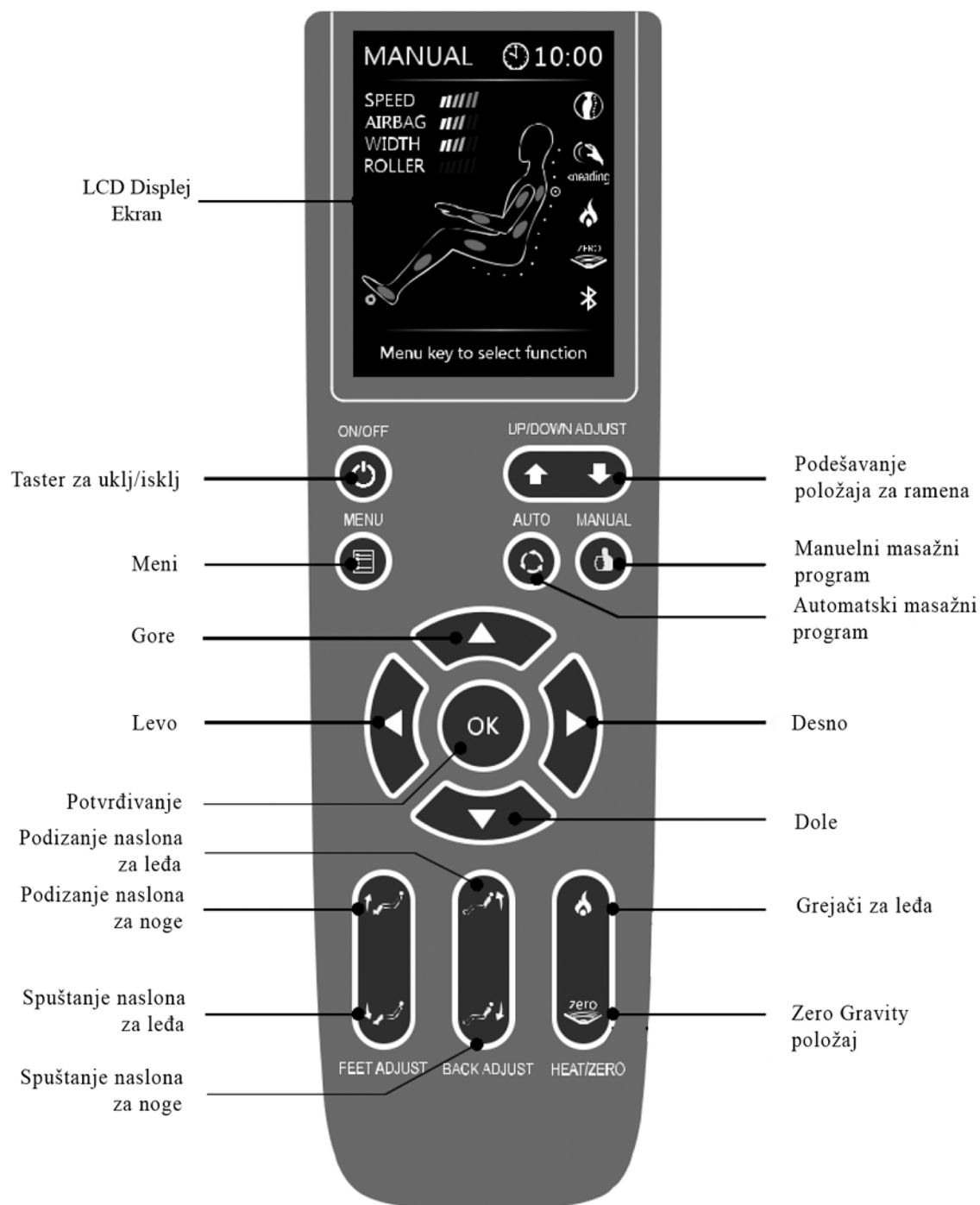

▶ NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE

Uputstvo za daljinsko upravljanje

Taster za uključivanje/ isključivanje uređaja.



- ▶ Pritiskom na ovaj taster prikazaće se meni, LCD ekran će se upaliti koristite tastere Gore/Dole/Levo/Desno za navigaciju ekranom, pritisnite OK da biste izabrali.
- ▶ Ponovnim pritiskom ovog tastera ćete isključiti uređaj.

Meni



- ▶ Prikazuje funkcije automatskog programa, manualnog programa, vazдушnih jastuka, grejača, rolera (valjaka i ostalih podešavanja).



Podešavanje položaja ramena

- ▶ Pritisnite i držite taster za podešavanje položaja ramena kako biste podesili valjke u željeni položaj dok ste u manualnom programu.
- ▶ Pritisnite i držite taster za podešavanje položaja ramena kako biste podesili valjke u željeni položaj dok ste u proceduri skeniranja tela



Automatski masažni program

- ▶ Pritisnite za prikaz menija automatskog režima. Kada je automatski program pokrenut, pritisnite ovaj taster kako biste izabrali željeni program. Aktivirani program se prikazuje na vrhu ekrana.(Proverite meni za detaljne informacije).



Manualni masažni program

- ▶ Pritisnite za prikaze manualnog masažnog program kako biste birali između sledećih opcija: REŽIM,DEO TELA,ŠIRINA i BRZINA,možete odabrati i željenu tehniku masaže među 6 unapred podešenih načina masaže. (Proverite meni za detaljne informacije)



Navigacija

- ▶ Koristite tastere Gore/Dole/Levo/Desno kako biste izabrali željenu opciju. Pritisnite OK da potvrdite izabranu opciju.
- ▶ Dok je automatski masažni program pokrenut, koristite tastere Gore / Dole kako biste promenili intenzitet masaže vazдушnim jastucima.



Grejači za leđa

- ▶ Uključivanje/ isključivanje funkcije grejanja.Pritiskom na ovaj taster uključujete funkciju grejača za leđa, na ekranu će zasvetliti ikonica grejača, ponovnim pritiskom na ovaj taster isključujete funkciju grejača za leđa, ikonica grejača na LCD ekranu će se isključiti.

Zero Gravity položaj

Pritiskom na ovaj taster aktivirate Zero gravity položaj. Zero gravity ikonica na ekranu će se upaliti. Ponovnim pritiskom na ovaj taster ćete isključiti funkciju Zero gravity položaja. Zero gravity ikonica na ekranu će se ugasi.

▶ NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE



Podizanje naslona za noge

- ▶ Pritisnite i držite kako biste podigli naslon za noge; otpustite taster da biste zaustavili. (uverite se da u okolini nema prepreka)

Spuštanje naslona za noge

- ▶ Pritisnite i držite kako biste spustili naslon za noge; otpustite taster da biste zaustavili. (uverite se da u okolini nema prepreka)



Podizanje naslona za leđa

- ▶ Pritisnite i držite kako biste podigli naslon za leđa; otpustite taster da biste zaustavili.


Spuštanje naslona za leđa

- ▶ Pritisnite i držite kako biste spustili naslon za leđa; otpustite taster da biste zaustavili.

Instrukcije za Meni ekrana

▶ Automatski masažni programi

Pritiskom na taster Auto Program pojaviće se meni, pritiskom na taster birate jedan od 9 automatskih programa: RECOVERY, EXTEND, RELAX, REFRESH, UPPER AUTO, LOWER AUTO, BOSS NURSING, QUEEN SUMMING, SOUL SPA. Pritisnite OK taster kako biste izabrali željeni program, nakon čega će se isti pojaviti na ekranu.

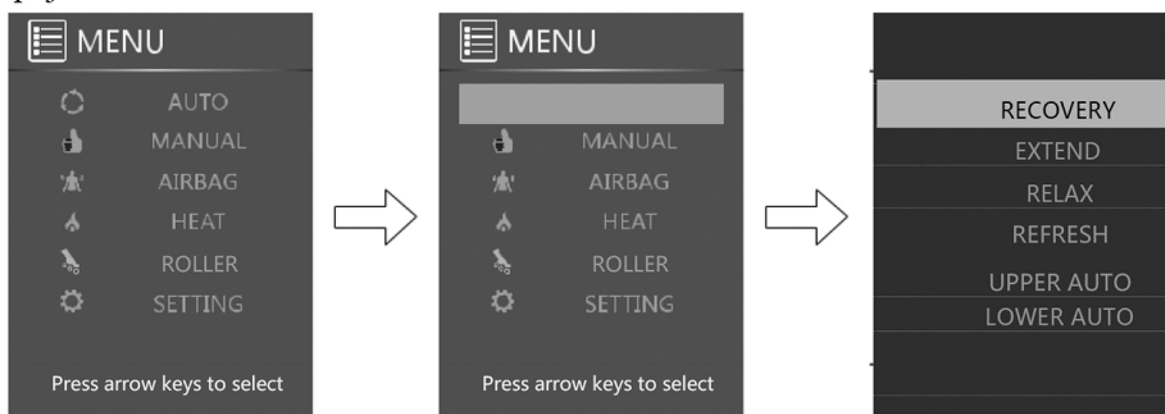

Recovery: Program napravljen, pre svega za oporavak, oslobađanje umora i stresa nakon napornog rada na poslu.

Extend: Inspirisan tajlandskom masažom ističe u prvi plan istezanje tela. Ovaj masažni program koristi tehnike gnječenja i istezanja kako bi opustio umorne mišiće i održao ih fleksibilnim.

Relax: Dizajniran za jutarnje ili popodnevno opuštanje, pomaže u jačanju održivosti mišića.

▶ NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE


Refresh: Fokusira se na uske i bolne mišiće, ublažava bolove u lumbalnom delu, leđima i vratu.

Lower Auto: Izaberite ciljnu zonu prema vašim željama.

Boss Nursing: Pruža intenzivnu masažu usredsređenu na ublažavanje napetosti u vratu i ramenima. Donosi maksimalno olakšanje korisnicima koji provode duge sate za stolom.


Queen Slimming: Pruža blage tehnike masaže za opuštanje mišića leđa i struka.

Soul Spa: Dizajniran za jutarnje ili popodnevno opuštanje, pomaže u jačanju održivosti mišića.

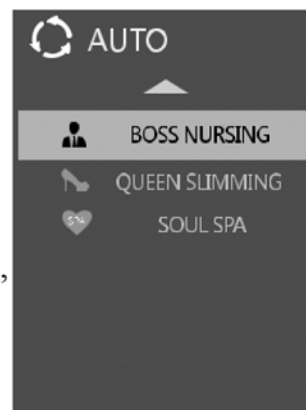

▶ Manualni masažni programi


Pritisnite taster MANUAL iz MENU-a na ekranu, Pritisnite taster GOLE ili DOLE Kako biste izabrali: MODE, PART, WIDTH, SPEED.

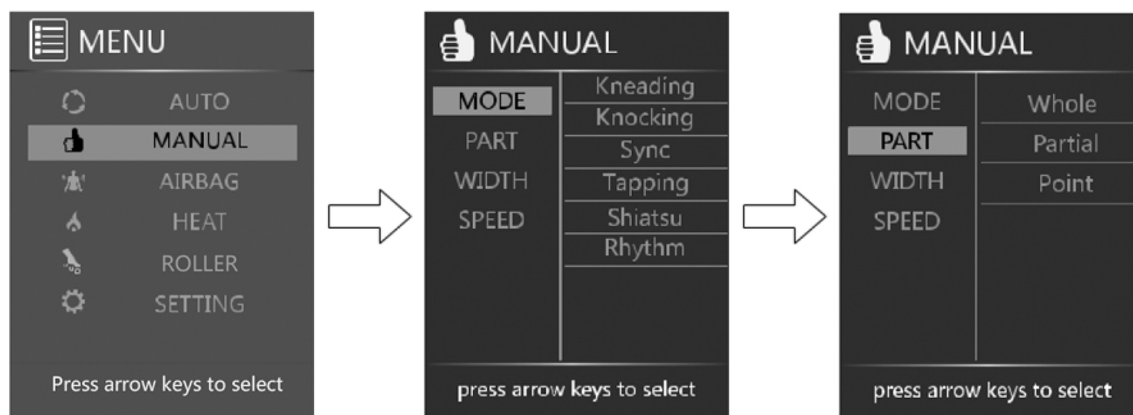

Massage Mode: Izaberite MODE iz opcije MANUAL na ekranu, pritisnite taster DESNO, nakon toga izaberite taster GORE ili DOLE kako biste izabrali željenu opciju: Kneading (gnječenje), Knocking (lupkanje), Sync, Tapping (tapkanje), Shiatsu (šiacu), i Rhythm masažne tehnike. Pritisnite taster OK kako biste aktivirali željenu tehniku. Izabrana opcija će se pojaviti na ekranu.

Back Mechanism Massage Part: Izaberite PART iz opcije MANUAL na ekranu, nakon toga izaberite taster GORE ili DOLE kako biste birali između: masaže celog tela, parcijalne masaže ili pozicioniranja masaže u jednoj tački. Pritisnite taster OK kako biste aktivirali željenu opciju. Izabrana opcija će se pojaviti na ekranu.

▶ NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE

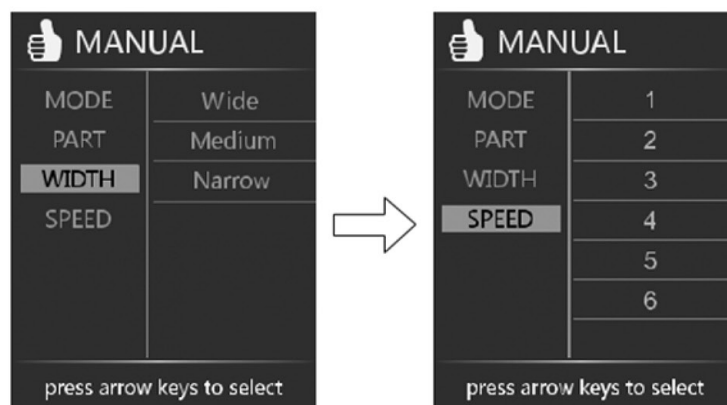


Back Mechanism Massage Width: Izaberite WIDTH iz opcije MANUAL na displeju, pritisnite taster DESNO a nakon toga GORE ili DOLE kako biste izabrali između: širokog, srednjeg ili uskog mehanizma širine valjaka. Pritisnite OK taster kako biste izabrali željenu opciju. Izabrana širina valjaka će se prikazati na ekranu.

Mechanism Massage Speed: Izaberite Speed iz opcije MANUAL na ekranu, pritisnite taster DESNO, a nakon toga GORE ili DOLE kako biste izabrali: nivo 1, 2, 3, 4, 5, 6 brzine masažnog mehanizma. Pritisnite taster OK kako biste izabrali željeni nivo brzine.

▶ Vazdušni pritisak

Izaberite AIRBAG iz opcije MENU na ekranu, pritisnite taster DESNO a zatim GORE ili DOLE kako biste izabrali između: PART-Regija vazdušnog pritiska i Force-Intenzitet vazdušnog pritiska. Pritisnite taster OK kako biste uneli željena podešavanja.

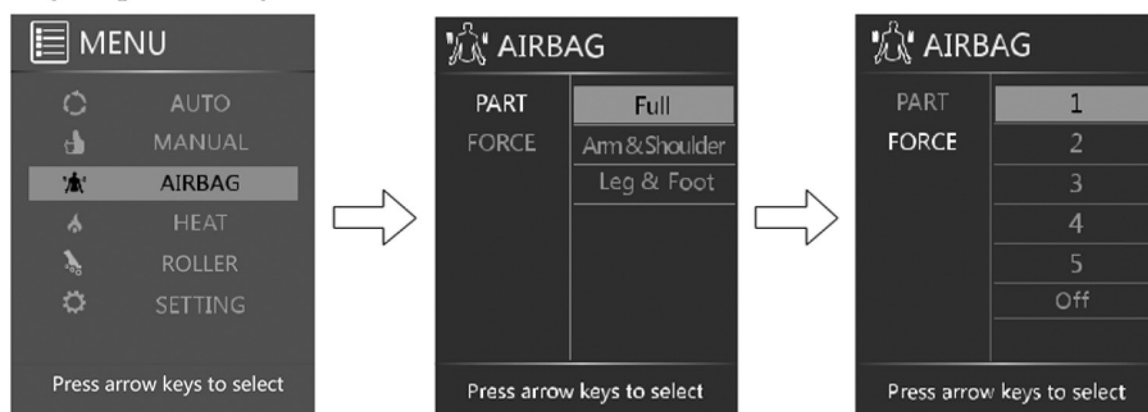

Part-Regija vazdušnog pritiska: Izaberite PART iz opcije AIRBAG na ekranu, pritisnite taster DESNO a zatim GORE ili DOLE kako biste izabrali jednu od sledećih opcija: Ruke i ramena ili Noge i stopala. Pritisnite OK kako biste potvrdili željenu opciju.

Force-Intenzitet vazdušnog pritiska: Izaberite FORCE iz opcije AIRBAG, pritisnite taster DESNO a zatim GORE ili DOLE kako biste izabrali: nivo 1, 2, 3, 4, 5 intenziteta vazdušnog pritiska, ili OFF (isključiti vazdušni pritisak). Pritisnite taster OK kako biste potvrdili željenu opciju.

PRELIMINARNE PROVERE

Time (vreme):

Izaberite TIME iz opcije SETTING kako biste podesili tajmer: 10min,20min,30min. Pritisnite taster DESNO, zatim GORE ili DOLE za navigaciju. Pritisnite taster OK kako biste podesili željeno vreme.

Language (jezik):

Izaberite LANGUAGE iz opcije SETTING kako biste izabrali jezik: 中文, EN. Pritisnite DESNO a zatim GORE ili DOLE za navigaciju, pritisnite OK kako biste potvrdili izabrani jezik.

Bluetooth:

Izaberite opciju BLUETOOTH, pritisnite DESNO a zatim taster GORE ili DOLE da biste aktivirali odnosno deaktivirali funkciju Bluetooth. Pritisnite OK da biste potvrdili željenu postavku. Napomena: Sva gore navedena podešavanja će biti memorisana i neće biti potrebe ponovo ih podešavati u slučaju nestanka struje.

Preuzimanje i instaliranje aplikacije

Preuzmi i instaliraj aplikaciju, zatim upravljaj komandama na masažnoj stolici sa svog telefona:


► **Za iOS uređaje:**

Otvorite App Store na vašem iOS uređaju (iPhone, iPad, ili iPod touch), upotrebite "063500014" za pretragu, preuzmite aplikaciju na vaš uređaj i obavite potrebna podešavanja. Kada je instalacija završena, otvorite aplikaciju, uključite Bluetooth na uređaju i povežite se sa masažnom stolicom. (Napomena: verzija iOS uređaja mora biti iznad 4.0)

► **Za Android uređaje:**

Prodavac će mail-om dostaviti link za aplikaciju korisniku. Nakon instalacije i potrebnih podešavanja potrebno je uključiti Bluetooth na mobilnom uređaju i povezati ga sa masažnom stolicom. (Napomena: verzija Android uređaja mora biti iznad 5.0 i sa funkcijom Bluetooth-a)

PAŽNJA: Obratite pažnju prilikom povezivanja da je Bluetooth opcija upaljena i na vašem uređaju i na masažnoj stolici.

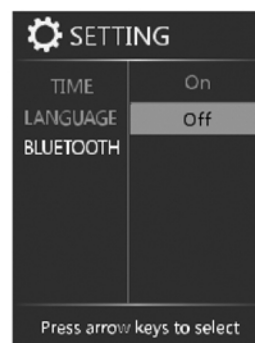


Press arrow keys to select

▶ NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE


▶ HEAT (Grejači)

Izaberite HEAT iz opcije MENU na ekranu, zatim pritisnite taster GORE ili DOLE kako biste uklju./isključ grejače.

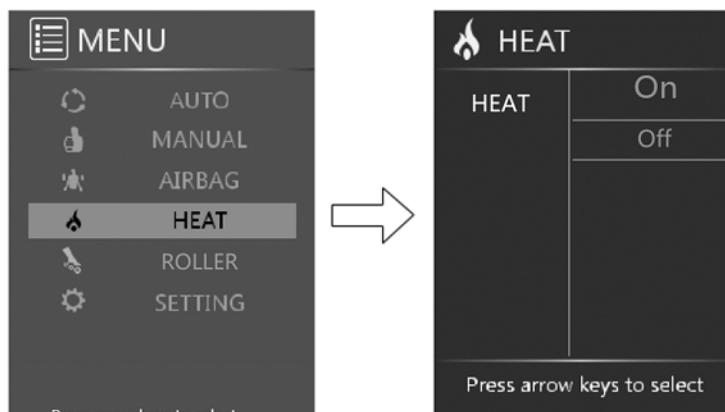


▶ ROLLER (Valjak)

Izaberite ROLLER iz opcije Menu na ekranu, zatim pritisnite taster GORE ili DOLE kako biste izabrali nivo brzine 1,2,3 ili isključivanje rada valjaka.

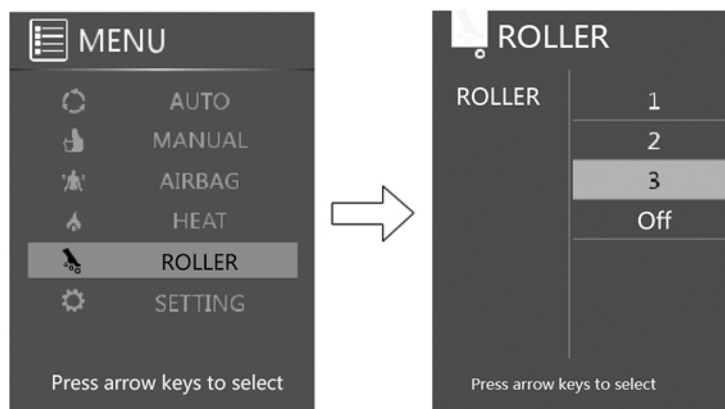

▶ Podešavanja


Izaberite SETTING iz opcije MANUAL na ekranu, pritisnite taster OK kako biste pristupili podešavanjima, zatim pritisnite taster GORE ili DOLE kako biste birali između: TIME (vreme), LANGUAGE (jezik), BLUETOOTH. Pritisnite taster OK kako biste uneli željena podešavanja.

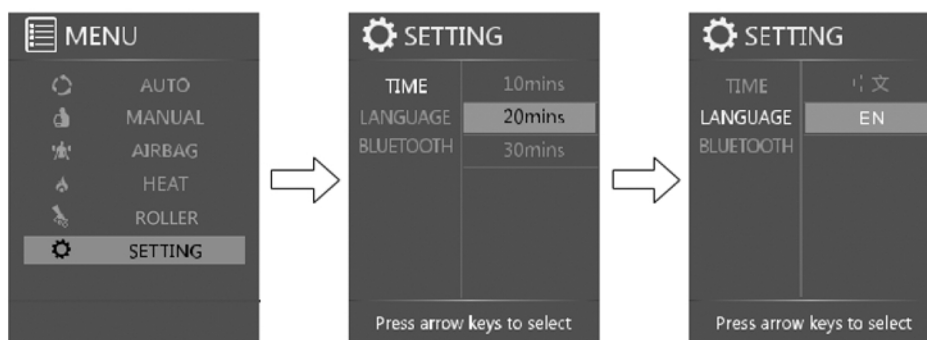


PRELIMINARNE PROVERE

Saveti:

1. Tokom automatskog ili manualnog podešavanja, LCD ekran će se automatski vratiti na početni ekran nakon 10 sekundi ukoliko na daljinskom upravljaču nije uneta nijedna operacija (vidi sliku).

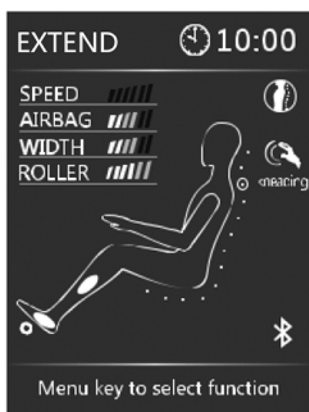

Prikaz početnog ekrana sa pokrenutim automatskim masažnim programom

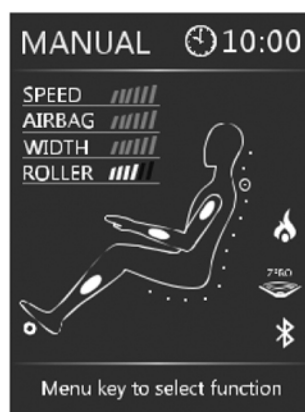

Prikaz početnog ekrana sa pokrenutim manualnim masažnim programom



Saveti

- ▶ Dok uređaj radi pritisnite dva puta taster MENU za povratak na početni ekran.
- ▶ Ispod početnog ekrana, pritisnite taster LEVO ili DESNO kako biste podesiti intenzitet vazdušnih jastuka (u automatskom ili manualnom režimu)
- ▶ Pritisnite taster AUTO da biste aktivirali automatski masažni program.



PAŽNJA


- ▶ Ne rastavljajte ovaj uređaj sami kako biste izbegli oštećenja i kvarove.
- ▶ Pobrinite se da voda ili neka druga tečnost ne uđe u daljinski upravljač kako biste izbegli kvar.

PRELIMINARNE PROVERE

Instalacija uređaja


Korak 1: Izvadite sve delove

- Pažljivo izvadite sadržaj ambalaže u koju je bio upakovan masažer i proverite da li se u pakovanju nalaze svi delovi.

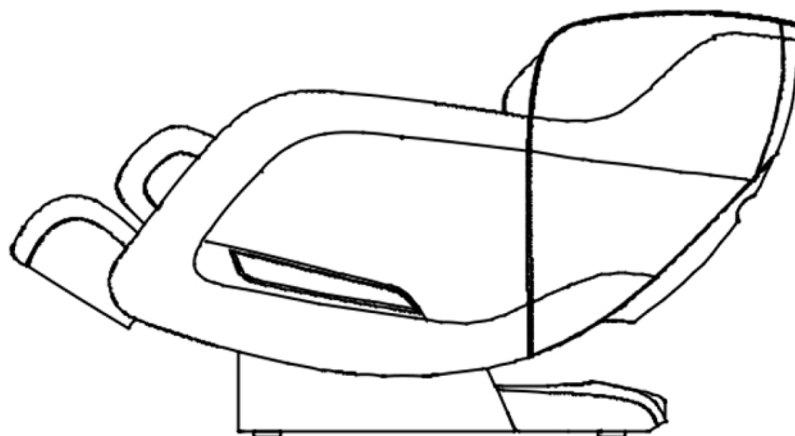


Korak 2: Instalacija daljinskog upravljača

- Povežite kabl daljinskog upravljača sa utikačem na masažnoj stolici (kao na slici), zatim zategnite poklopac u smeru kazaljke na satu kako biste učvrstili konektor.

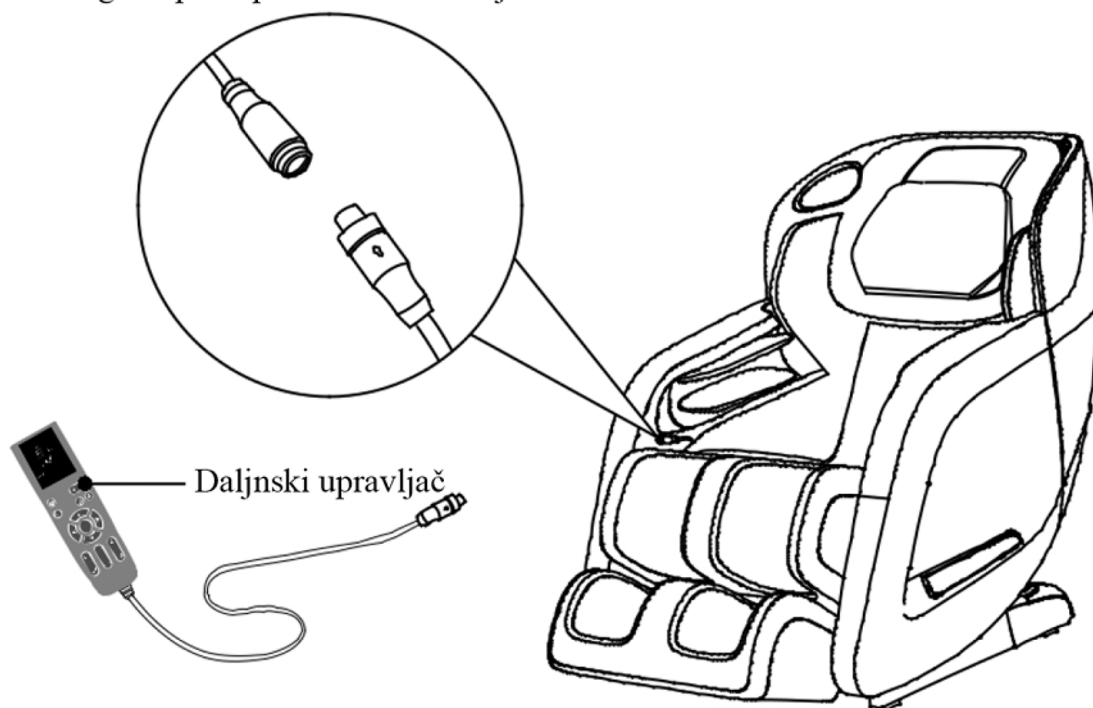

► PRELIMINARNE PROVERE

- Uključite kabl za napajanje u utičnicu (Kao na slici).

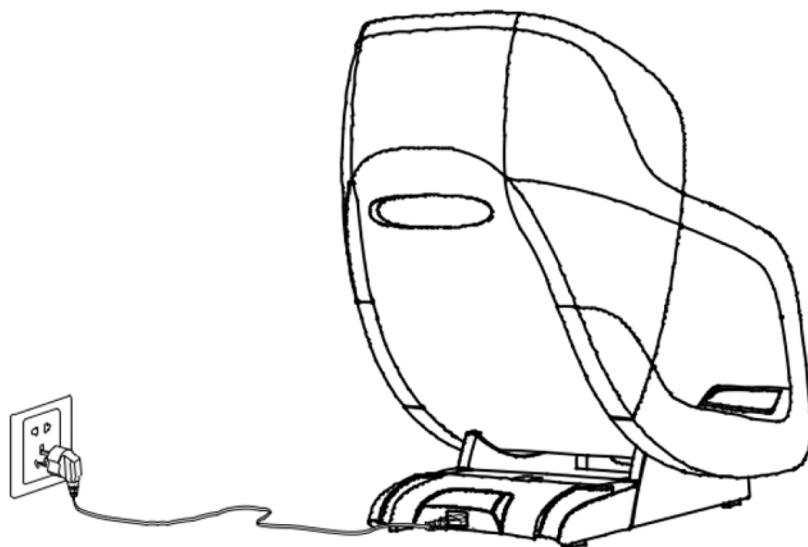

Puštanje u rad

- Pomoću daljinskog upravljača podesite naslon za leđa i noge, uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora pre puštanja u rad.
- Nakon upotrebe vratite naslon za leđa i noge u prvobitni položaj i isključite stolicu. (Da biste izabrali željeni program masaže pogledajte uputstva na daljinskom upravljaču).

Provera pre korišćenja

- Uverite se da je naslon za noge pravilno montiran pre nego što sednete u stolicu.
- Uverite se da je masažna stolica vraćena u prvobitni položaj pre nego što sednete u nju.




OPREZ

- NE sedajte u stolicu ukoliko je naslon za noge podignut.
- NE opterećujte previše naslon za noge kako biste izbegli oštećenja.

PRELIMINARNE PROVERE

Premeštanje

- ▶ Isključite prekidač za napajanje i isključite uređaj iz utičnice. Uz pomoć dve osobe gurnite naslon za leđa i nagnite ga ka sebi, tako da fotelja ostane samo na točkicama. Nakon toga odgurajte masažnu stolicu na željeno mesto. (Pogledaj skicu).

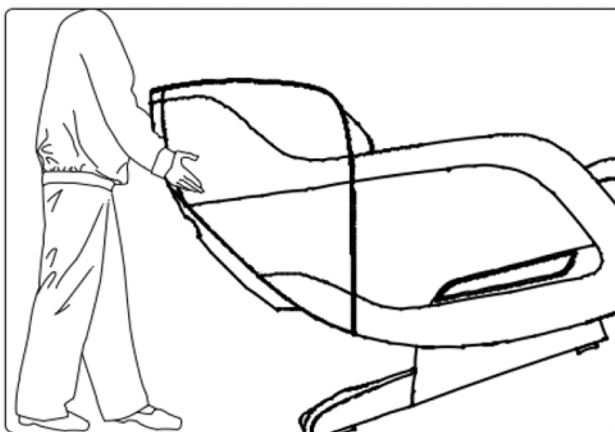

PAŽNJA

- ▶ Ne pomerajte stolicu ukoliko se u njoj nalazi neka osoba.
- ▶ Ne premeštajte stolicu držeći je za naslon za noge niti za naslon za ruke. Stolica je teška, te oprezno manevrišite.

Povezivanje na napajanje

- ▶ Povežite ovaj uređaj na monofaznu, pravilno uzemljenu utičnicu.
- ▶ Uključite glavni prekidač za napajanje.



PAŽNJA


- ▶ Pre uključivanja masažne stolice, uverite se da nema oštećenja na kablu za napajanje.
- ▶ Pre povezivanja na napajanje, uverite se da je prekidač za napajanje isključen.

PRELIMINARNE PROVERE

Prostor za instalaciju


Prostor za masažnu stolicu:

- Udaljenost naslona za leđa od zida ili slične prepreke treba da bude veća od 15cm. Udaljenost naslona za noge od zida ili slične prepreke treba da bude veća od 20cm.

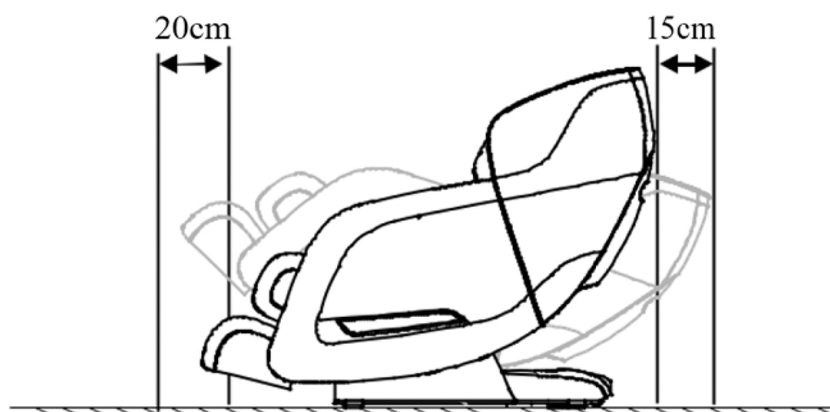

Podna zaštita

- Kako biste izbegli oštećenje poda preporučujemo da ispod masažne stolice stavite tepih ili neku sličnu podlogu radi zaštite.

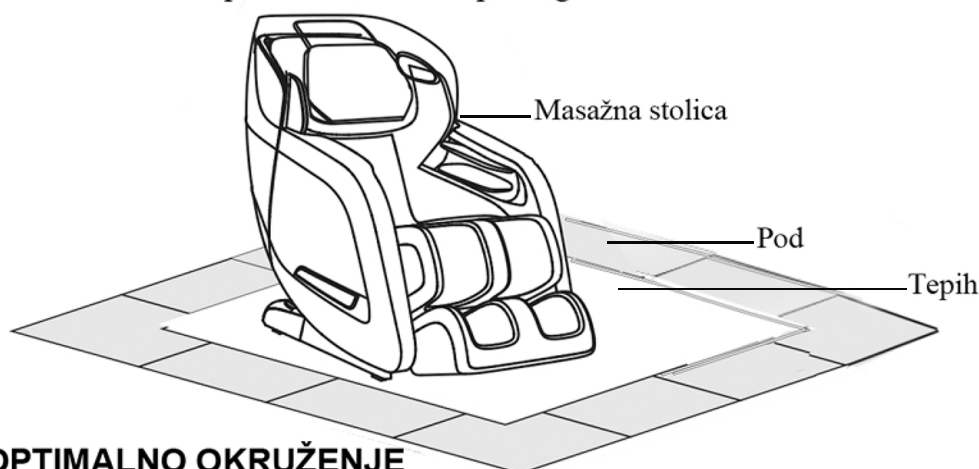

OPTIMALNO OKRUŽENJE

- Ne koristite masažnu stolicu u okruženju sa visokom vlažnošću kako biste sprečili strujni udar.
- Ne postavljajte masažnu stolicu u blizini grejnih uređaja kako biste sprečili opasnost od požara ili oštećenje proizvoda.



Uzemljenje

- Ovaj uređaj mora imati uzemljenje, utikač mora biti uključen u odgovarajuću utičnicu sa monofaznim uzemljenjem koja je pravilno instalirana prema lokalnim propisima kako bi se smanjio rizik od strujnog udara.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Instrukcije za održavanje

- ▶ Čišćenje zadnjeg panela, naslona za ruke, noge, plastičnih delova ili creva za vazduh vršite prvo blagom penom deterdženta a zatim suvom krpom.
- ▶ Čišćenje daljinskog upravljača i ploče za napajanje vršite samo suvom krpom.
- ▶ Za čišćenje naslona za leđa i jastučića koristite samo sredstva za čišćenje na bazi vode, obrišite vlažnom krpom i ostavite da se osuši.
- ▶ Čišćenje presvlaka za noge vršite tako što ih uklonite sa stolice, operete na ruke blagim deterdžentom i ostavite da se osuše.

OPREZ

- ▶ Pre bilo kakvog servisiranja izvući kabl za napajanje iz zida. Kako biste izbegli strujni udar, ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama. Uverite se da deterdžent ne ulazi u kutiju za napajanje tokom čišćenja.
- ▶ Ne koristite razređivač niti druge rastvarače na ovom proizvodu jer to može prouzrokovati oštećenje proizvoda.
- ▶ Ne peglajte presvlake.

Skladištenje

- ▶ Ukoliko duže vreme nećete koristiti uređaj, prekrijte ga prekrivačem kako biste sprečili skupljanje prašine.

PAŽNJA

- ▶ Ne ostavljajte ovaj uređaj izložen sunčevoj svetlosti na duži period jer to može izazvati oštećenja.

Saveti

Tokom svakodnevne upotrebe molimo da pratite sledeće alarmantne simptome:

- ▶ Miris paljevine
- ▶ Uređaj se pali i gasi kada se kabl za napajanje pomera.
- ▶ Kabl za napajanje je veoma topao
- ▶ Drugi neuobičajeni simptomi.

OPREZ

- ▶ Ne koristite uređaj ukoliko je uočen bilo koji od gore navedenih simptoma. Isključite kabl za napajanje iz zida i kontaktirajte lokalnog distributera ili dobavljača radi popravke.
- ▶ Za sva servisiranja, osim gore navedenog održavanja kontaktirajte servisni centar.



Izvućite kabl za napajanje iz zida pre radova na održavanju. Kako biste izbegli strujni udar ili nezgode, ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama. Ne pokušavajte sami da popravite uređaj već ga pošaljite ovlašćenom servisu.

REŠAVANJE PROBLEMA

Br.	Nedostaci	Uzroci	Rešenja
1	Zvuci prilikom Upotrebe.	Ovi zvuci su normalni i nastaju prilikom trenja valjaka za masažu i kožne obloge.	Nije potrebno preduzimati nikakve mere.
2	Masažna stolica se ne pokreće.	Kabl za napajanje nije pričvršćen u utičnicu.	Ubacite kabl za napajanje pravilno u utičnicu
		Prekidač za napajanje je isključen.	Uključite prekidač.
		Osigurač je pregoreo.	Zameniti ga isključivo osiguračem istog tipa i snage .
3	Nema muzike iz zvučnika nakon povezivanja bluetooth-a.	Jačina zvuka je smanjena na najniže.	Podesite jačinu zvuka na mobilnom uređaju.
4	Naslon za leđa ili noge ne može da se spusti ili podigne.	Prekomerno opterećenje je položeno na naslone.	Smanjite opterećenje i pokušajte ponovo.
5	Kvar vazdušnog jastuka.	Vazdušno crevo je blokirano.	Ispraviti vazdušno crevo i ukloniti blokadu.

Ukoliko se problem ne otkloni obratite se prodavcu radi održavanja.

Savet: Ne pokušavajte sami popraviti uređaj, naša kompanija neće biti odgovorna za štetu nastalu neovlašćenim servisiranjem. Zahvaljujemo na saradnji.



SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda: Masažna fotelja ARCUS

Model: AMBASADOR

Napon: 220-240V

Frekvencija: 50-60Hz

Snaga: 120W

Zaštićeni dizajn: Klasa I