


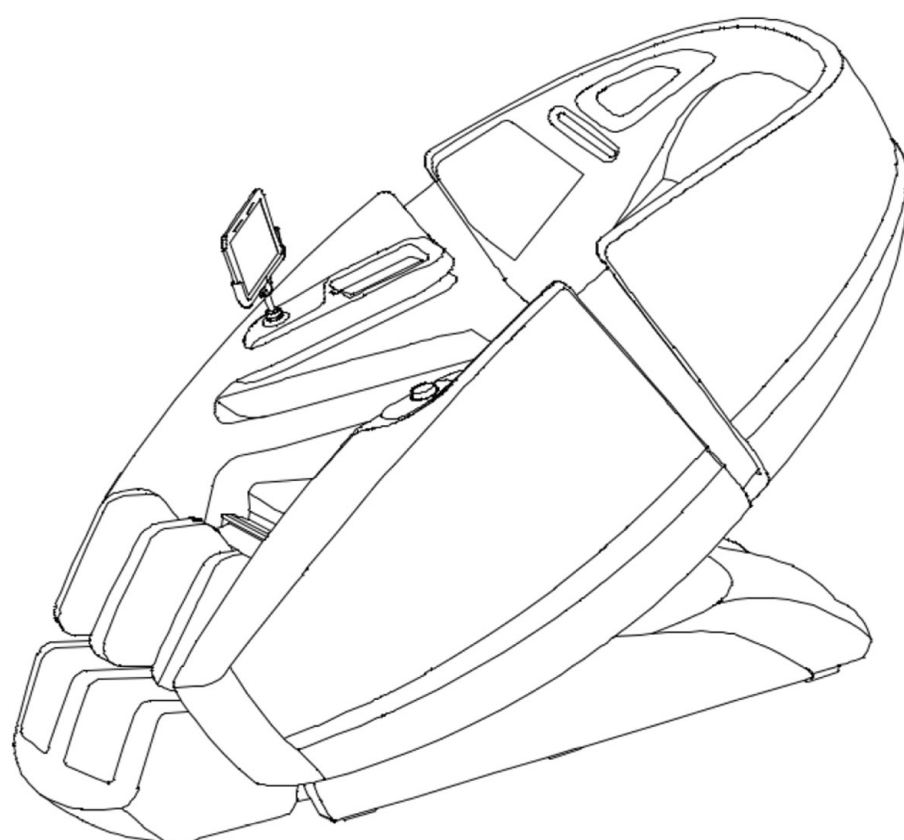

Masažna fotelja

ARCUS
EXCELLENT

Zahvaljujemo na kupovini naših proizvoda. Pre upotrebe, molimo Vas da pročitate pažljivo ova uputstva kako biste osigurali ispravnu instalaciju i rad. Molimo, čuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.

CONTENTS

MERE OPREZA	1
NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE	3
Spoljašna struktura	3
Unutrašnja struktura	3
Kontrolna tabla	4
Instrukcije za kontrolnu jedinicu	5
Instrukcije za daljinski upravljač na dodir	6
KARAKTERISTIKE	7
PRELIMINARNE PROVERE	8
Instalacija	8
Prostor za instalaciju	11
Podna zaštita	11
Premeštanje	13
Povezivanje na napajanje	13
Puštanje u rad	14
Provera pre upotrebe	14
Izduživanje/ Skupljanje naslona za noge	15
Nakon upotrebe	15
ČUVANJE I ODRŽAVANJE	16
REŠAVANJE PROBLEMA	17
SPECIFIKACIJE	17

MERE OPREZA

► Dole navedene mere predostrožnosti će vam pomoći da obezbedite pravilnu upotrebu ovog uređaja. ►
Opasnost koja može nastati nepravilnom upotrebom klasifikovana je u OPREZ i PAŽNJA.

OPREZ	Nepravilna upotreba može izazvati povrede korisnika.		
PAŽNJA	Nepravilna upotreba može izazvati oštećenje proizvoda.		
	Zabranjeno		Ne rasklapati

Rizični korisnici

Preporučujemo da se osobe, sa bilo kojim od sledećih stanja pre upotrebe konsultuju sa lekarom.

 OPREZ	◆ Osobe koje imaju elektronski medicinski uređaj ugrađen u telo, kao što je pejsmejker za srce ◆ Osobe koje su pod bilo kakvom terapijom, posebno ako se ne osećaju dobro. ◆ Osobe sa malignim oboljenjima.(koje su pod nadzorom). ◆ Žene koje su u ciklusu ili drugom stanju. ◆ Osobe koje boluju od osteoporoze ili preloma kičme. ◆ Osobe koje boluju od kožnih bolesti. ◆ Osobe koje imaju visoku temperaturu. ◆ Neophodan je strog nadzor kada ovaj proizvod koriste, ili su u njegovoj blizini deca i osobe sa invaliditetom ◆ Uređaj poseduje grejače. Osobe koje slabije osećaju toplotu moraju biti oprezne pri korišćenju ovog uređaja. ◆ Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima odnosno sa manjkom iskustva i znanja, samo ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumevanje opasnosti. ◆ Deci nije dozvoljeno igranje sa uređajem. ◆ Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora roditelja.
---	--

Mere opreza za daljinsko upravljanje

 PAŽNJA	◆ Nemojte rukovati daljinskim upravljačem niti povlačiti kabl vlažnom rukom ◆ Kako biste izbegli kvar, ne prosipajte vodu ili drugu tečnost na daljinski upravljač
--	---

Upozorenja u vezi sa adapterima i kablom

 PAŽNJA	◆ Uvek isključite uređaj iz utičnice odmah nakon upotrebe i pre čišćenja. ◆ Uređaj nikada ne ostavljati bez nadzora kada je uključen. Uvek isključiti uređaj iz utičnice kada se ne koristi. ◆ Isključiti uređaj iz utičnice prilikom grmljavine ili oluje sa grmljavinom ◆ Nikada nemojte koristiti uređaj ako ima oštećen kabl ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je pao i ošteti se ili je upao u vodu. Odnosite uređaj u servisni centar na pregled i popravku ◆ Proverite da li podaci na nalepnici sa navedenim napajanjem odgovaraju vašem lokalnom napajanju el.energ. ◆ Nemojte vlažnom rukom iskopčavati kabl kako biste izbegli strujni udar. ◆ Ne vucite kabl pri isključivanju, dohvatite prednji plastični kraj kako biste ga iskopčali. ◆ Ne pritiskajte, ne savijajte, ne vucite i ne uvrćite kabl. ◆ Držite kabl dalje od grejnih površina. ◆ Ne nosite ovaj uređaj pomoću kabla za napajanje i ne koristite kabl kao ručku. ◆ Da biste isključili uređaj, okrenite sve kontrole u položaj za isključivanje, a zatim izvucite utikač iz utičnice. ◆ Uređaj se može koristiti samo sa jedinicom za napajanje koja je isporučena uz uređaj. ◆ Isporučuje se samo sa sigurnosnim, izuzetno niskim naponom koji odgovara oznaci na uređaju. ◆ Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač, serviser, ili podjednako kvalifikovana osoba mora ga zameniti kako bi se izbegla opasnost
--	--

MERE OPREZA

Najbolje okolnosti


	◆ Ne koristite uređaj u okruženju gde je temperatura iznad 40°C. ◆ Ne koristite uređaj u vlažnom ili prašnjavom okruženju, niti kada je bilo koji deo tela u kontaktu sa vodom ili bilo kojim sličnim tlom. ◆ Ne koristite uređaj na otvorenom. ◆ Povežite uređaj samo sa pravilno uzemljenom utičnicom. Pogledajte uputstva za uzemljenje. ◆ Molimo vas da postavite uređaj na ravnu površinu. ◆ Ne čuvati uređaj u blizini izvora grejanja ili otvorenog plamena.
---	---

Saveti za bezbednu upotrebu


 PAŽNJA	◆ Predviđeno za težinu korisnika ispod 120kg ◆ Koristite ovaj uređaj samo za predviđenu upotrebu kako je opisano u ovom uputstvu. ◆ Ne koristite proizvod u terapijske svrhe. ◆ Uređaj može koristiti samo jedna osoba, a ne dve ili više osoba istovremeno kako bi se time to izbegla oštećenja. ◆ Nemojte koristiti uređaj odmah nakon obroka, može izazvati nelagodnost. ◆ Uklonite nakit sa ruku i ispraznite džepove dok koristite usluge masaže. ◆ Proverite tapacirung ispod jastuka i drugih mesta, ako uočite oštećenja nemojte koristiti uređaj već se obratite kvalifikovanom servisu. ◆ Ukoliko tokom korišćenja uređaja osetite bilo kakvu neuobičajenu nelagodnost odmah isključite uređaj i nemojte ga koristiti. ◆ Preporučuje se upotreba uređaja u trajanju od 20min. ◆ Uverite se da ima dovoljno prostora iza i ispred masažne stolice pre podešavanja naslona za leđa i noge. ◆ Uverite se da osim korisnika ništa drugo ne vrši prekomerni pritisak na naslon za leđa i noge. ◆ Kada spuštate naslon za noge ili leđa uverite se da mala deca nisu u blizini. ◆ Molimo vas da sedite pravilno prilikom korišćenja uređaja. ◆ Ne vucite uređaj po parketu ili sličnoj površini kako biste izbegli njeno oštećenje.
 ZABRANJENO	◆ Ne naslanjajte teške predmete na naslon za noge ◆ Deca uvek moraju biti pod nadzorom kad su u blizini masažne stolice. ◆ Nemojte zaspiti u masažnoj stolici dok radi. ◆ Ne konzumirajte alkohol prilikom upotrebe uređaja. ◆ Ukoliko prilikom korišćenja uređaja osetite dim ili neki neprijatan miris, prekinite dalje korišćenje i isključite kabl za napajanje iz zida.
 NE RASKLAPAJ	◆ Ne rastavljajte proizvod sami kako biste izbegli kvar. ◆ Ne radite demontažu, popravke i modifikacije na svoju ruku već kontaktirajte ovlašćenog prodavca.

► NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE

Spoljašna struktura

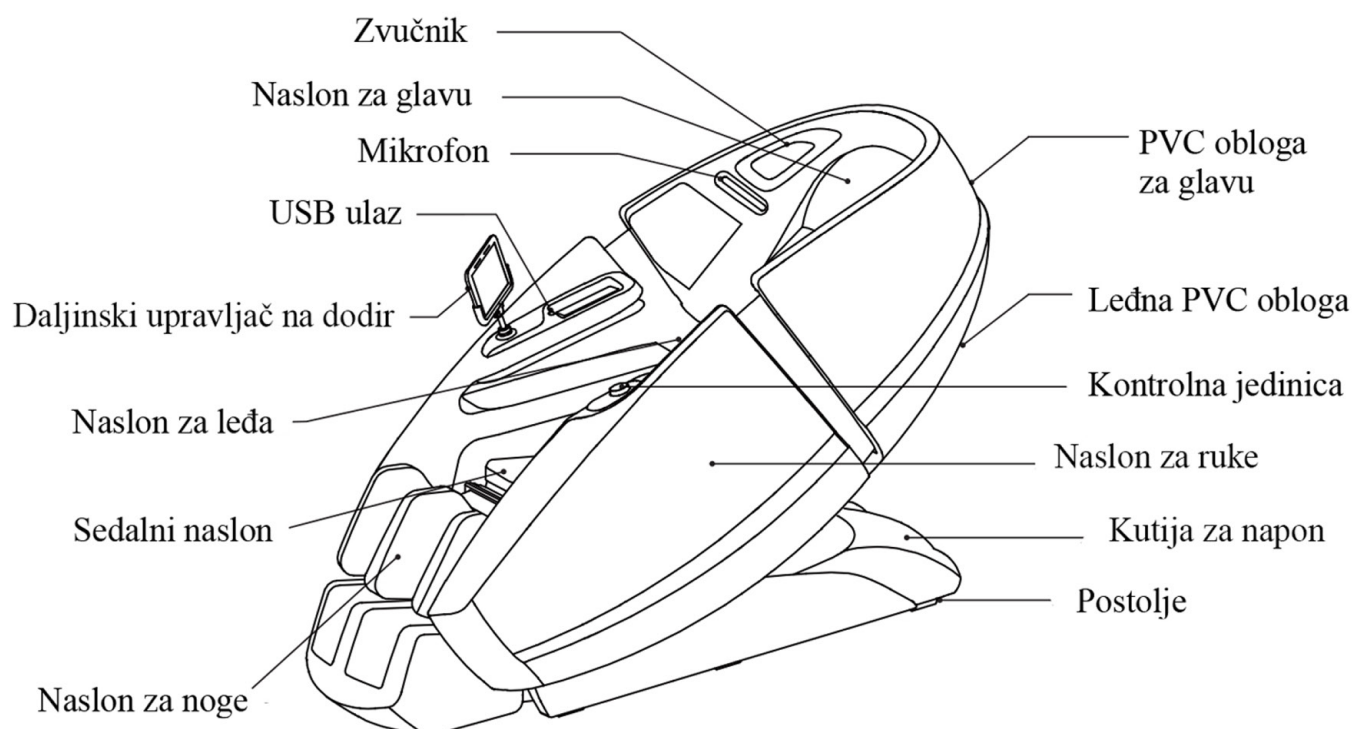


Unutrašnja struktura

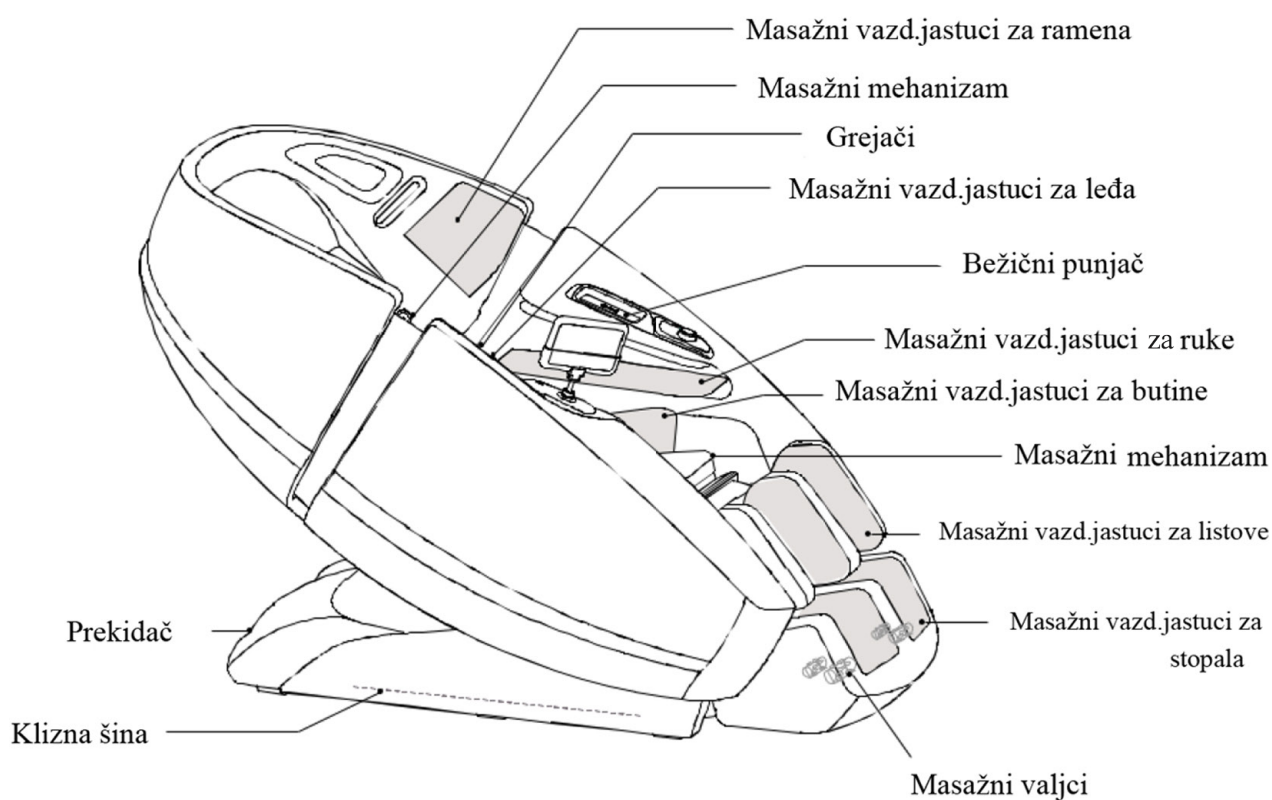

► NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE

Kontrolna jedinica

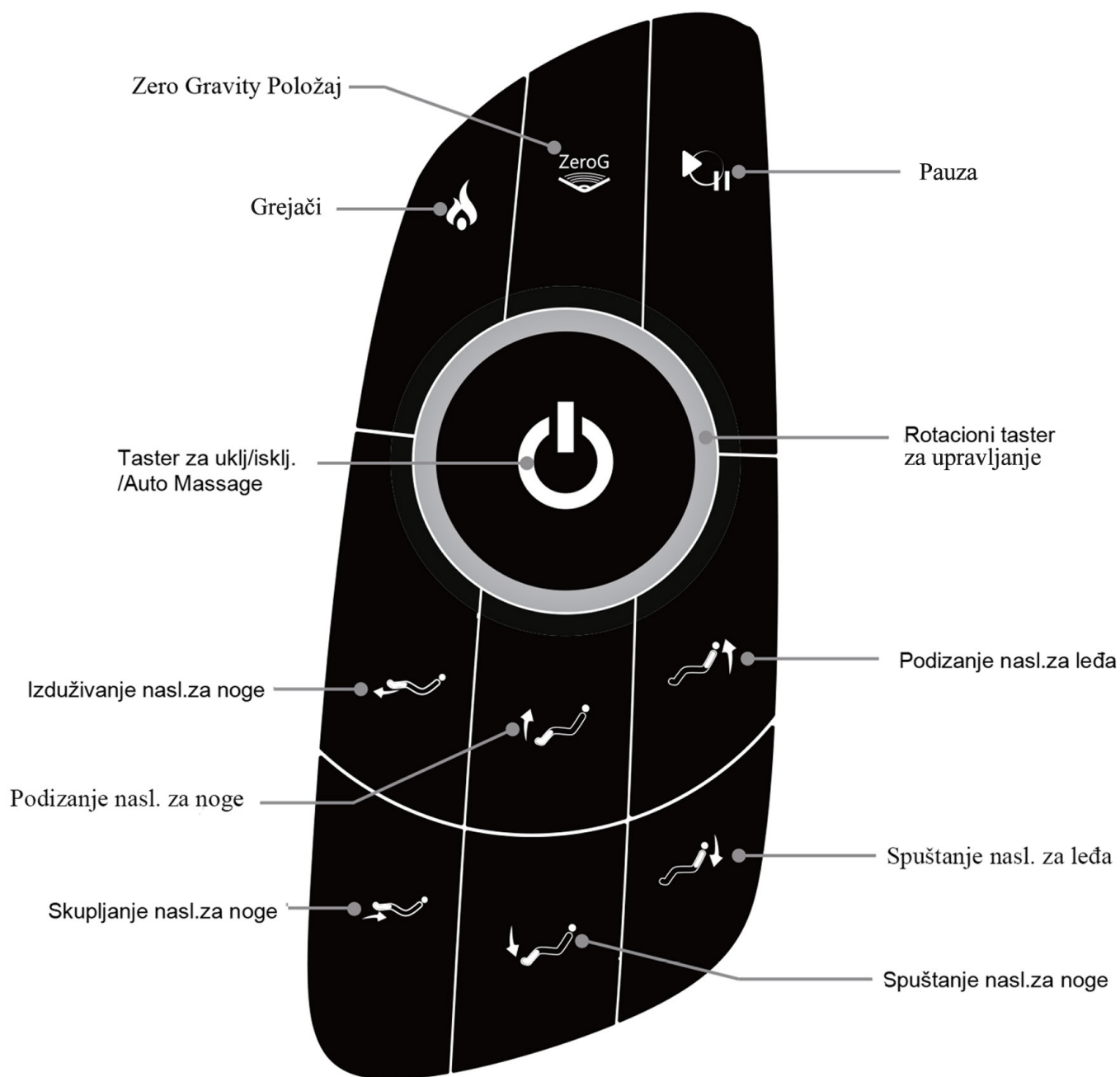

NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE

Instrukcije za kontrolnu jedinicu



Uključivanje/Isključivanje/Automatska Masaža

Brzo pritisnite rotacioni taster za upravljanje da biste izabrali automatski masažni program.



Rotacioni taster za upravljanje

Rotirajte u smeru kazaljke na satu / suprotno od kazaljke na satu da biste povećali / smanjili intenzitet 3D masaže.



Zero Gravity Položaj

Pritisnite za postavljanje stolice u Zero Gravity Položaj, pritisnite ponovno za vraćanje u početni položaj.



Izduživanje naslona za noge

Pritisnite i držite taster kako biste izdužili naslon za noge. Otpustite taster da biste zaustavili. (Uverite se da u okolini nema prepreka)



Skupljanje naslona za noge

Pritisnite i držite taster kako biste skupili naslon za noge. Otpustite taster da biste zaustavili.



Pauza

Pritisnite da biste privremeno zaustavili rad stolice. Ponovnim pritiskanjem pokrećete stolicu.



Podizanje naslona za noge

Pritisnite i držite taster kako biste podigli naslon za noge. Otpustite taster da biste zaustavili



Spustanje naslona za noge

Pritisnite i držite taster kako biste spustili naslon za noge. Otpustite taster da biste zaustavili.



Grejači

Pritisnite i držite taster kako biste uključili grejače. Ponovnim pritiskom isključujete grejače.

NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE



Podizanje naslona za leđa

Pritisnite i držite taster kako biste podigli naslon za leđa. Otpustite taster da biste zaustavili.



Spuštanje naslona za leđa

Pritisnite i držite taster kako biste spustili naslon za leđa. Otpustite taster da biste zaustavili.


Instrukcije za daljinski na dodir

- ▶ Pogledajte “Instrukcije za daljinsko upravljanje” na ekranu daljinskog upravljača.

KARAKTERISTIKE

1. Jednim pritiskom masažna stolica će kliznuti napred

Kliznuće napred za 28cm, a zatim će se oboriti kako bi uštedela prostor i pružila korisniku relaksirajući položaj.

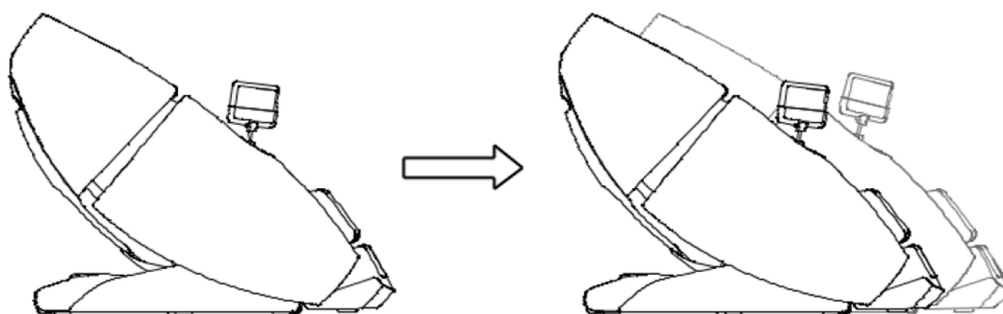

2. Zero Gravity Položaj

U takvom beztežinskom položaju, visina nogu je nešto iznad gornjeg dela tela, samim tim težina tela se ravnomerno raspoređuje smanjujući fizički i psihički pritisak na zglobove

3. Automatsko/Manualno izduživanje naslona za noge

Gornji deo naslona za noge može se proširiti za 7 cm, a donji deo naslona za noge može se automatski proširiti za 15 cm za korisnike različitog rasta.

4. Masaža celog tela vazдушnim jastucima

Masaža vazдушnim jastucima za ramena, ruke, leđa, struk, kukove, noge i stopala.

5. Masaža valjcima

3 valjka u naslona za stopala pružaju masažu pritiska u svim smerovima za refleksnu zonu.

6. Masažne tehnike

Pruža masažu masažnih tehnika imitacije ljudskih pokreta: gnječenje, lupkanje, sinhronizovanu, tapkanje, šiacu, sa dodatnom masažnom trljanja tela za potpuno opuštanje.

PRELIMINARNE PROVERE


Instalacija uređaja

Korak 1: Izvadite sve delove


- Pažljivo izvadite sadržaj ambalaže u koju je upakovan masažer i proverite da li se u pakovanju nalaze svi delovi.

Korak 2: Instalacija naslona za ruke

- Priključite numerisana creva za vazduh u odgovarajuću numerisanu mlaznicu za vazduh na naslonu za ruke i priključite konektor za napajanje.
(Na drugom bočnom naslonu za ruke nalaze se 2 čepa ventila za vazduh)

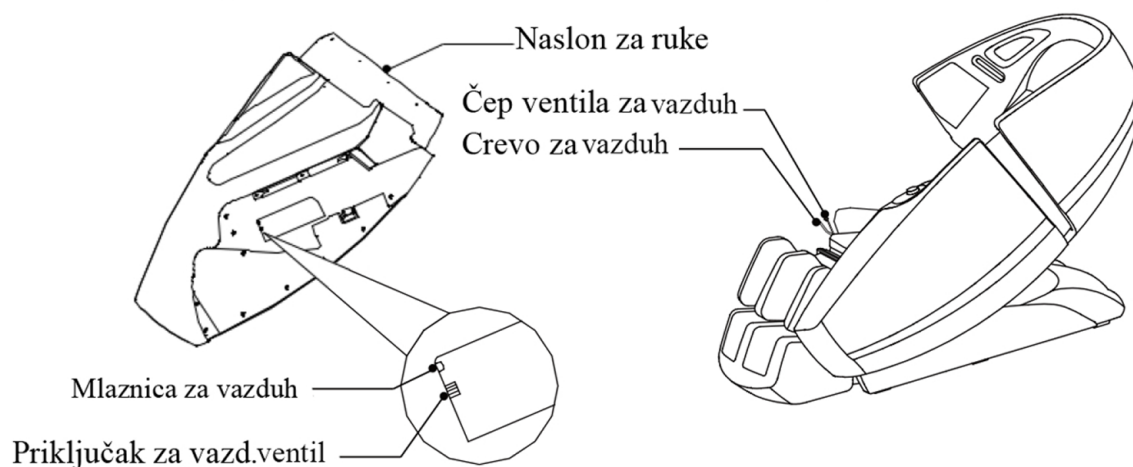


- Pričvrstite naslon za ruke za kačaljku 2 na nosač, polako gurnite naslon za ruke nazad do konektora dok se kačaljka 2 ne poravna sa kačaljkom 4, umetnite kačaljku 1 u držač 3, koristite vijak da pričvrstite naslon. Ponovite isti postupak i za drugi naslon za ruke.

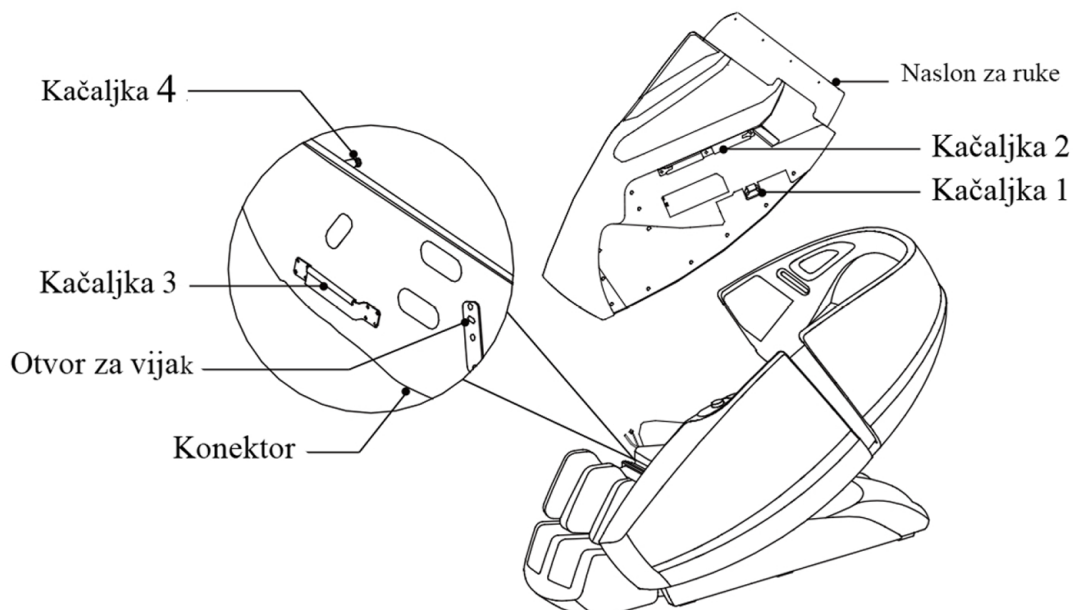

PRELIMINARNE PROVERE


Step 3: Instaliranje daljinskog upravljača na dodir

- Umetnite donji kraj držača daljinskog upravljača na dodir u utičnicu, okrenite maticu u smeru kazaljke na satu kako biste pričvrstili upravljač.

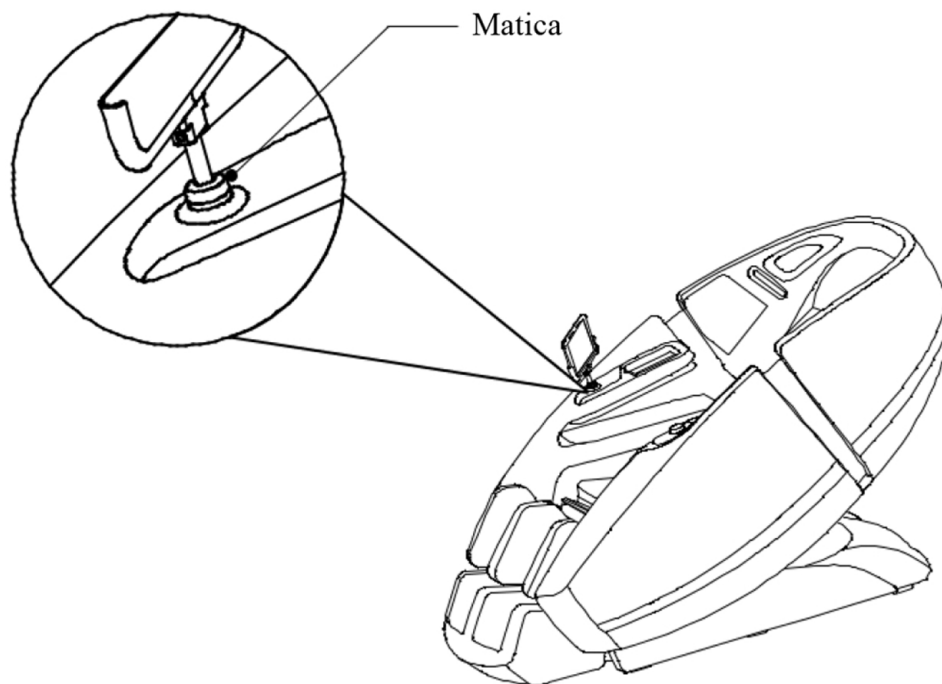


Step 4: Instaliranje naslona za noge

- Podignite naslon za noge, uvucite vazdušno crevo u mlaznicu za vazduh i postavite čep vazdušnog ventila u priključak za vazdušni ventil koji se nalazi na prednjoj strani osnove sedišta, uverite se da su dobro pričvršćeni.

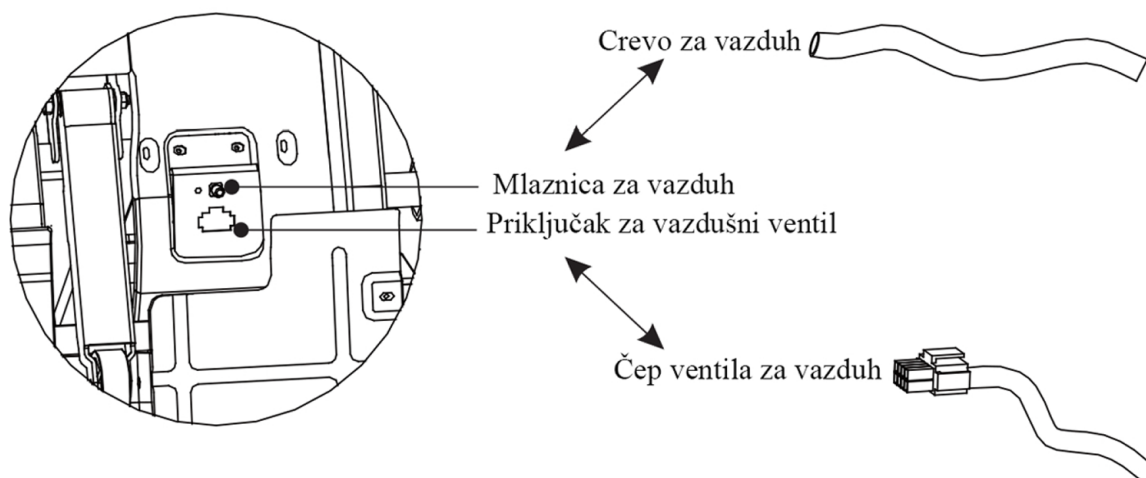


PRELIMINARNE PROVERE

- Postaviti rozetu ušice nasl.za noge na ušicu nasl.za noge, zatim postaviti ušicu nasl.za noge na osovinu, postavite osigurač do kraja osovine da učvrstite naslon za noge. Nakon toga zakopčajte rajsfešlus naslona za noge.

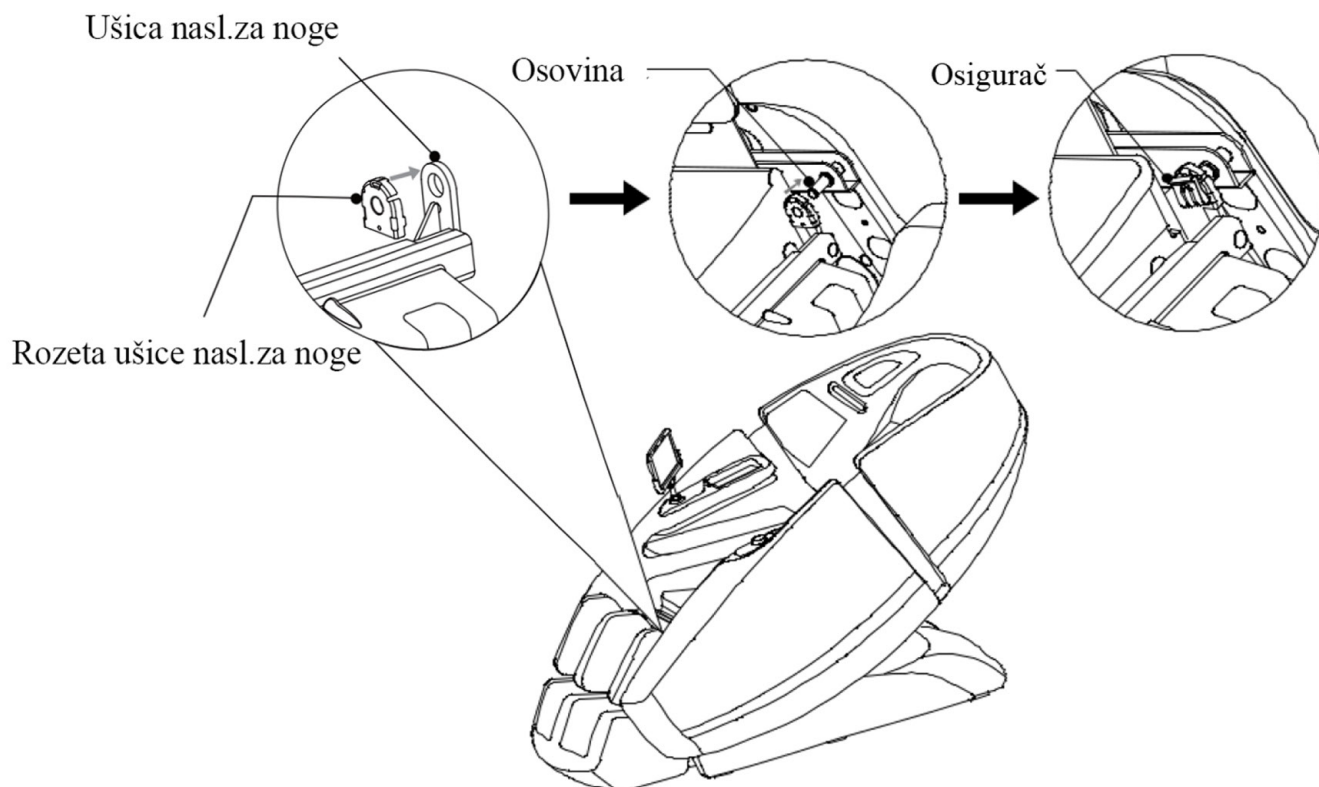

Korak 5:

- Spojite kabl za napajanje u utičnicu proizvoda koja se nalazi na kutiji za napajanje proizvoda.

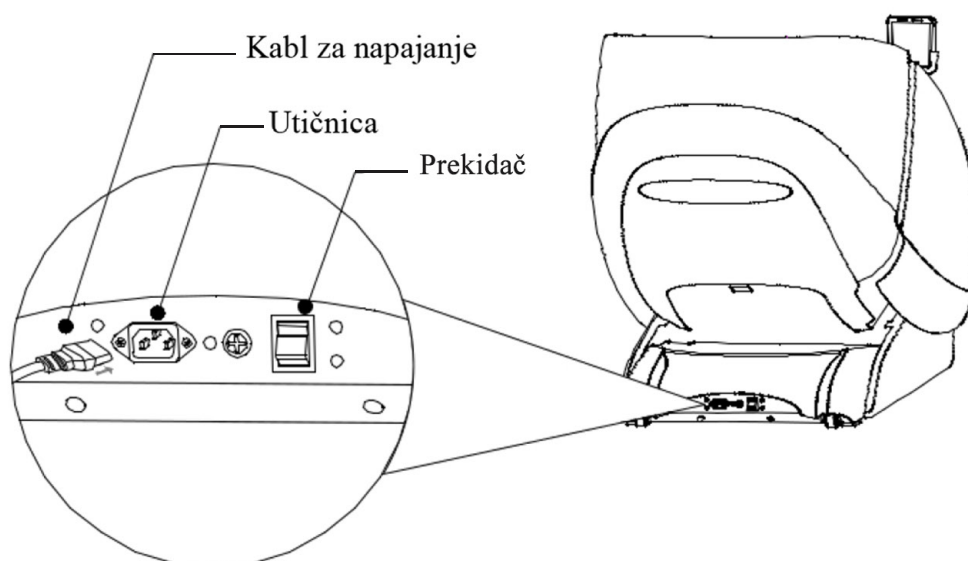


PRELIMINARNE PROVERE

Prostor za instalaciju


Prostor za masažnu stolicu

- Udaljenost naslona za leđa od zida ili slične prepreke treba da bude veća od 10cm. Udaljenost naslona za noge od zida ili slične prepreke treba da bude veća od 60cm.

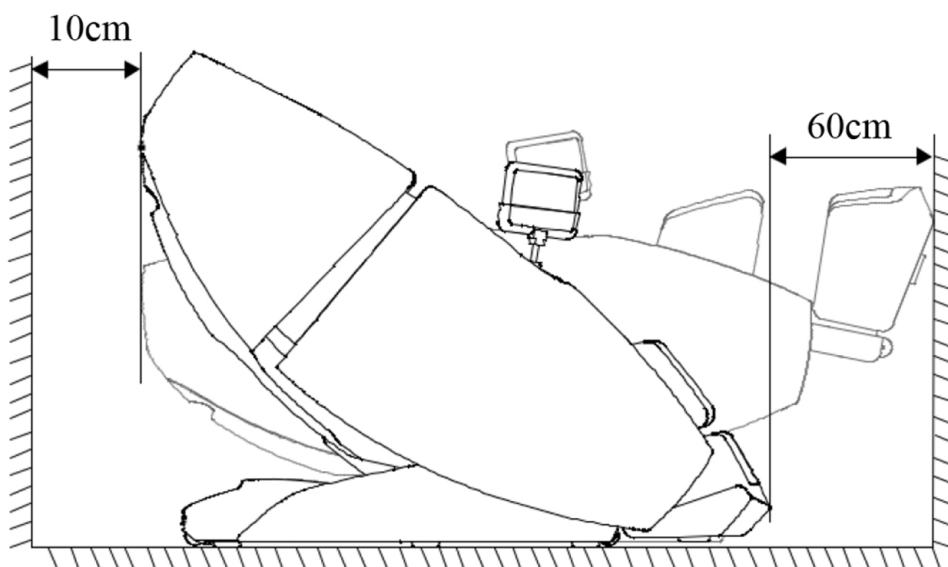

Podna zaštita

- Kako biste izbegli oštećenje poda preporučujemo da ispod masažne stolice stavite tepih ili neku sličnu podlogu radi zaštite.

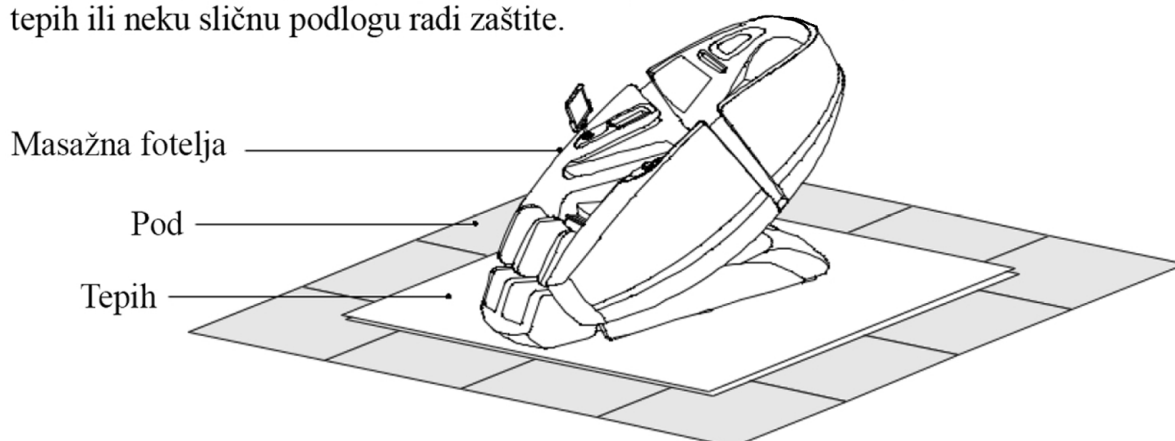

PRELIMINARNE PROVERE

PAŽNJA



Ne koristite masažnu stolicu u okruženju sa visokom vlažnošću kako biste sprečili strujni udar.



Ne postavljajte masažnu stolicu u blizini grejnih uređaja kako biste sprečili opasnost od požara ili oštećenje proizvoda.

Uzemljenje




Ovaj uređaj mora imati uzemljenje, utikač mora biti uključen u odgovarajuću utičnicu sa monofaznim uzemljenjem koja je pravilno instalirana prema lokalnim propisima kako bi se smanjio rizik od strujnog udara.

PRELIMINARNE PROVERE

Premeštanje

- Isključite prekidač za napajanje i isključite uređaj iz utičnice. Uz pomoć dve osobe gurnite naslon za leđa i nagnite ga ka sebi, tako da fotelja ostane samo na točkićima. Nakon toga odgurajte masažnu stolicu na željeno mesto. (Pogledaj skicu).

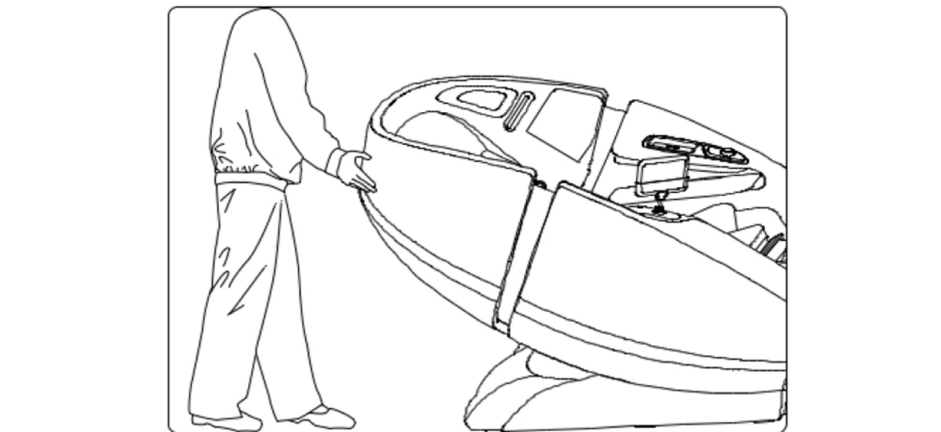

OPREZ

- Ne pomerajte stolicu ukoliko se u njoj nalazi neka osoba.
Ne premeštajte stolicu držeći je za naslon za noge niti za naslon za ruke.
Stolica je teška, te oprezno manevrišite.

Povezivanje na napajanje

- Povežite ovaj uređaj na monofaznu, pravilno uzemljenu utičnicu.
- Uključite glavni prekidač za napajanje.


OPREZ

- Pre uključivanja masažne stolice, uverite se da nema oštećenja na kablu za napajanje.
- Pre povezivanja na napajanje, uverite se da je prekidač za napajanje isključen.

PRELIMINARNE PROVERE

Puštanje u rad

- ▶ Pomoću daljinskog upravljača podesite naslon za leđa i noge, uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora pre puštanja u rad.
- ▶ Nakon upotrebe vratite naslon za leđa i noge u prvobitni položaj i isključite stolicu.
(Da biste izabrali željeni masažni program pogledajte opcije na kontrolnoj jedinici.)

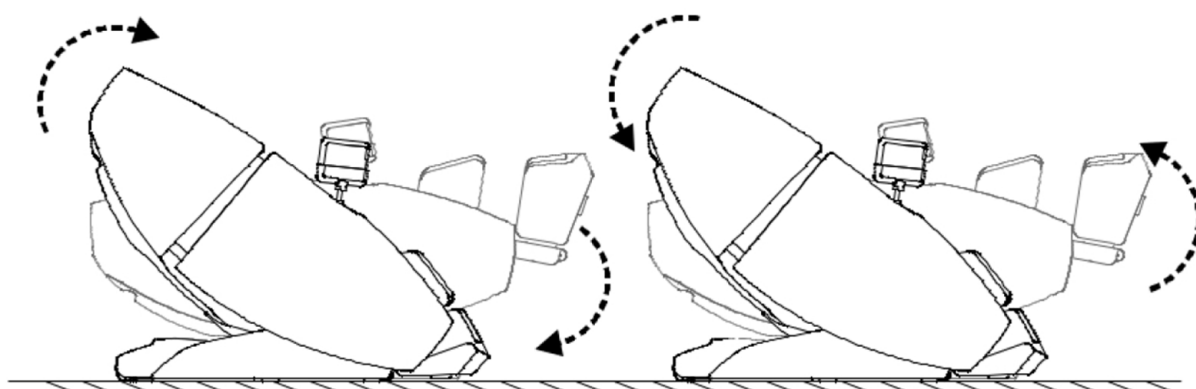

Provera pre korišćenja

- ▶ Uverite se da je naslon za noge pravilno montiran pre nego što sednete u stolicu.
- ▶ Uverite se da je masažna stolica vraćena u prvobitni položaj pre nego što sednete u nju.



OPREZ

- ▶ NE sedajte u stolicu ukoliko je naslon za noge podignut.
- ▶ NE opterećujte previše naslon za noge kako biste izbegli oštećenja.

PRELIMINARNE PROVERE


Podešavanje naslona za noge

- ▶ Pritisnite i zadržite “” ili “” taster kako biste izdužili/skupili naslon za noge. Otpustite taster kada namestite željeni položaj.

Izduživanje nasl. za noge



Skupljanje nasl.za noge

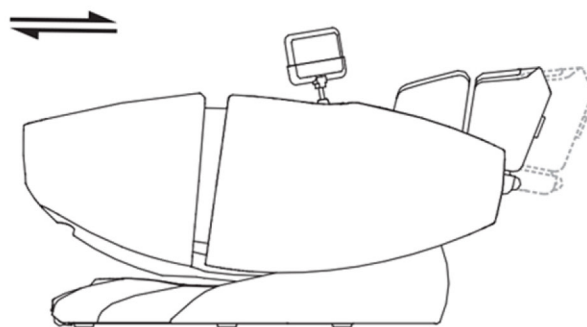

- ▶ Senzor je postavljen na dno naslona za noge i automatski će podesiti dužinu kada se stolica pokrene.



WARNING

- ▶ Zapranjeno je nepravilno upravljanje stolicom.
- ▶ Uverite se da nema prepreka prilikom obaranja naslona za leđa i noge.
- ▶ Ne stavljajte stopala, prste ili bilo koje druge predmete u prostor između sedišta i naslona.
- ▶ Uverite se da se masažna stolica vratila u početni položaj pre nego što ustanete sa nje

Nakon upotrebe

- ▶ Uvek isključite kabl za napajanje iz utičnice nakon korišćenja masažne fotelje.
- ▶ Pričvrstite središnju konzolu za držač.
- ▶ Nakon upotrebe isključiti stolicu iz utičnice. Potrebno je decu držati pod nadzorom kako se ne bi igrali sa masažnom stolicom i kako ne bi dodirivali kutiju za napajanje.
- ▶ Ukoliko uređaj ne planirate koristiti duži vremenski period, preporučljivo je da isti prekrijete i odložite u prostor bez vlage i prašine.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Instrukcije za održavanje

- ▶ Čišćenje zadnjeg panela, naslona za ruke, noge, plastičnih delova ili creva za vazduh vršite prvo blagom penom deterdženta a zatim suvom krpom
- ▶ Čišćenje daljinskog upravljača i ploče za napajanje vršite samo suvom krpom.
- ▶ Za čišćenje naslona za leđa i jastučića koristite samo sredstva za čišćenje na bazi vode, obrišite vlažnom krpom i ostavite da se osuši.
- ▶ Čišćenje presvlake za noge vršite tako što ih uklonite sa stolice, operete na ruke blagim deterdžentom i ostavite da se osuše.



PAŽNJA

- ▶ Pre bilo kakvog servisiranja izvući kabl za napajanje iz zida. Kako biste izbegli strujni udar, ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama. Uverite se da deterdžent ne ulazi u kutiju za napajanje tokom čišćenja.
- ▶ Ne koristite rasređivač niti druge rastvarače na ovom proizvodu jer to može prouzrokovati oštećenje proizvoda.
- ▶ Ne peglajte presvlake.

Skladištenje

- ▶ Ukoliko duže vreme nećete koristiti uređaj, prekrijte ga pokrivačem kako biste sprečili skupljanje prašine..



PAŽNJA

- ▶ Ne ostavljajte ovaj uređaj izložen sunčevoj svetlosti na duži period jer to može izazvati oštećenja.

Savet

Tokom svakodnevne upotrebe molimo da pratite sledeće alarmantne simptome:

- ▶ Miris paljevine.
- ▶ Uređaj se pali i gasi kada se kabl za napajanje pomera.
- ▶ Kabl za napajanje je veoma topao.
- ▶ Drugi neuobičajeni simptomi.



PAŽNJA

- ▶ Ne koristite uređaj ukoliko je uočen bilo koji od gore navedenih simptoma.
- ▶ Isključite kabl za napajanje iz zida i kontaktirajte lokalnog distributera ili dobavljača radi popravke.
- ▶ Za sva servisiranja, osim gore navedenog održavanja kontaktirajte servisni centar.



OPREZ

Izvucite kabl za napajanje iz zida pre radova na održavanju.. Kako biste izbegli strujni udar ili nezgode, ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama. Ne pokušavajte sami da popravite uređaj već ga pošaljite ovlašćenom servisu.

REŠAVANJE PROBLEMA

Br.	Simptomi	Uzroci	Rešenja
1	Zvuci prilikom upotrebe	Ovi zvuci su normalni i nastaju prilikom trenja valjaka za masažu i kožne obloge.	Nije potrebno preduzimati nikakve mere.
2	Masažna stolica se ne pokreće.	Kabl za napajanje nije pričvršćen u utičnicu	Ubacite kabl pravilno u utičnicu.
		Prekidač za napajanje je isključen.	Uključite prekidač.
		Osigurač je pregoreo.	Zamenite ga isključivo osiguračem istog tipa i snage.
3	Ne čuje se muzika na zvučnicima.	Jačina zvuka je na najnižem.	Podesite jačinu zvuka na mobilnom uređaju.
		Bluetooth je isključen.	Uključite bluetooth.
		Bluetooth nije povezan, ili je povezan sa drugim uređajem.	Ponovo povežite Bluetooth.
4	Naslon za noge ne može da se spusti/podigne	Prekomerno opterećenje se nalazi na naslonu za noge.	Uklonite opterećenje i pokušajte ponovo.

Ukoliko se problem ponavlja, molimo kontaktirajte ovlašćenog serviseru.

Važna napomena: Ne pokušavajte sami popraviti kvar kako biste izbegli povrede ili oštećenje proizvoda..

SPECIFIKACIJE

Naziv: Masažna fotelja EXCELLENT

Model: RT8900

Voltaža: 220-240V

Frekvencija: 50/60Hz

Snaga: 180W

Zaštićen dizajn: Klasa I