

SADRŽAJ

KRATAK UVOD	1
OPREZ	1
NAČIN KORIŠĆENJA.....	2
FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI	2
Kako da uključite i isključite masažer	3
Jedinstvena funkcija masaže gnječenjem.....	3
Jedinstvena funkcija refleksne masaže valjcima	3
NAČINI PRIMENE MASAŽERA.....	4
OTKLANJANJE PROBLEMA.....	5
ČUVANJE I ODRŽAVANJE	5
SPECIFIKACIJA PROIZVODA	5

KRATAK UVOD

Zahvaljujemo Vam se na kupovini masažera sa valjcima model RT-Q030. Molimo Vas da pre upotrebe, pažljivo pročitate ovo uputstvo da biste koristili masažer na odgovarajući način, vodeći posebno računa o delu gde se govori o sigurnosnim aspektima upotrebe. Bilo bi poželjno da uputstvo odložite na lako dostupno mesto, ukoliko kasnije budete želeli da se podsetite nekih delova.

1. Luksuzan uređaj sa kvalitetnom strukturom, ovaj masažer dvojakom funkcijom pomoću valjaka i gnječenim omogućava masažu stopala, listova, butina, zadnjice, stomaka, ramena, vrata i leđa.
2. Zgodan, izuzetnih karakteristika i lepog izgleda
3. Mogućnost izbora 3 brzine rada. Kada se masažer uključi, podešen je na 1 stepen brzine.
4. Pruža mogućnost izbora smera masaže, koje možete promeniti u svakom trenutku.
5. Jednostavno i pogodno rukovanje.


OPREZ

- Proverite da li napon u utičnici odgovara radnoj voltaži uređaja.
- Nakon korišćenja masažera ili prilikom čišćenja, obavezno izvucite kabl za napajanje iz utičnice u zidu.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama u kojima ima vlage, kao npr. kupatilo.
- Masažer koristite na ravnoj i suvoj podlozi.
- Nemojte primenjivati silu kada ste oslonjeni na masažer.
- Nemojte sedeti na masažeru.
- Nakon što uključite masažer u struju, nemojte ga ostaviti bez nadzora.
- Nemojte stavljati bilo kakve predmete na ili u masažer.
- U slučaju da masažer koriste nesavesne osobe ili deca, isti ne smeju biti bez nadzora.
- Nemojte sami popravljati masažer. U slučaju da dođe do oštećenja kabla za napajanje ili bilo kog drugog dela masažera, odmah prestanite sa upotrebom i što pre masažer odnesite kod ovlašćenog serviser.
- Za opravku se mogu koristiti samo rezervni delovi koje obezbeđuje proizvođač uređaja.
- U slučaju da osetite bilo kakvu nelagodnost prilikom upotrebe masažera, odmah prestanite sa daljim korišćenjem uređaja.
- Masažer nemojte stavljati u blizinu izvora velike toplote (grejalice i sl.).

NAČIN KORIŠĆENJA


Masažer je podešen tako da automatski proces masaže traje 15 minuta. Sve što Vi treba da uredite jeste da pritisnete taster, odaberete šta želite da izmasirate i da uživate u opuštajućoj masaži.

1. Priključite kabl za napajanje, pritisnite prekidač, svetlosni indikator će početi da treperi i masažer je spreman za rad.
2. Pritisnite taster "POWER", kada se indikator osvetli, počinje masaža valjcima u 1 stepenu brzine i automatski će se zaustaviti nakon 20 minuta.
3. Pritisnite taster "SPEED +" da ubrzate ili taster "SPEED –" da usporite masažu.
4. Tasterom "DIRECTION" možete da promenite smer masaže u bilo kom trenutku.

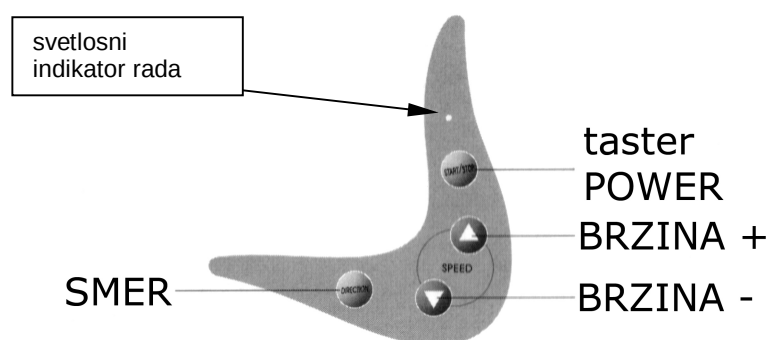

FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI

Masažer poseduje dva jedinstvena tipa masaže, masažu gnječenjem i refleksnu masažu valjcima, pogodnu za leđa i noge.

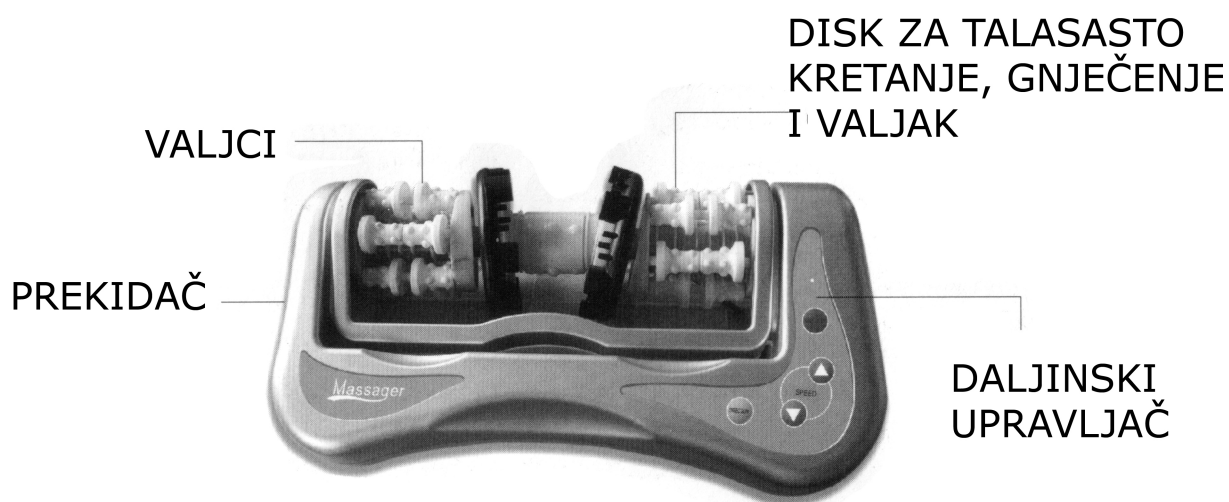

Kako da uključite i isključite masažer

- Priključite masažer na strujnu mrežu
- Pritisnite prekidač a potom i taster "POWER"
- Sada možete da koristite masažer
- Nakon upotrebe, isključite masažer na prekidač i izvucite utikač iz utičnice u zidu


Jedinstvena funkcija masaže gnječenjem

- Jedinstvena funkcija masaže gnječenjem efikasno i dubinski opušta mišiće nogu i leđa.
- Disk za talasasto kretanje, gnječenje i valjci, svojim ergonomskim dizajnom pružaju potpuniji i efikasniji osećaj masaže.
- Možete izabrati levi ili desni valjak i fokusirati masažu gnječenjem.
- Valjci i masaža gnječenjem omogućavaju efikasnu masažu duž kičmenog stuba i pojasnog dela.
- Brzinu masaže možete podesiti kako Vam najviše odgovara.


Jedinstvena funkcija refleksne masaže valjcima

- Ovaj masažer poseduje i valjke za masažu.
- Valjci su dizajnirani da odgovaraju zakrivljenosti ljudskih ruku i nogu, tako da bolje stimulišu nervne završetke na području primene.
- Svojim pokretima, obezbeđuju ritmičku stimulaciju tokom masaže, što potpomaže u opuštanju celog tela.
- Smer masaže valjcima možete podesiti kako Vam najviše odgovara.


NAČINI PRIMENE MASAŽERA

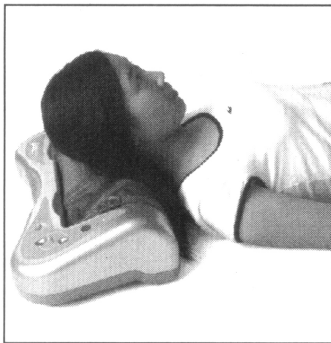


Vrat

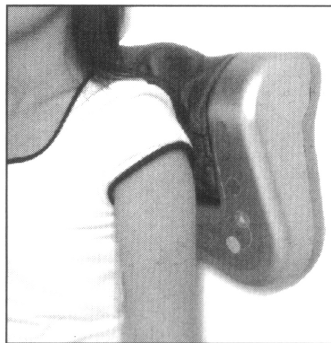


Rame

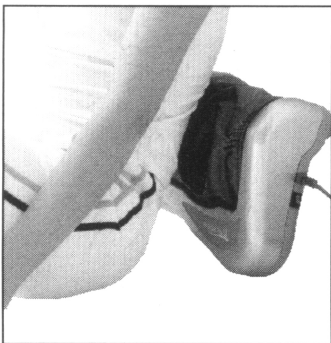


Leđa

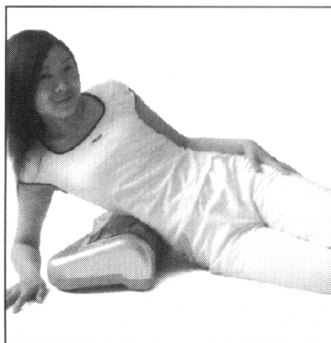


Struk

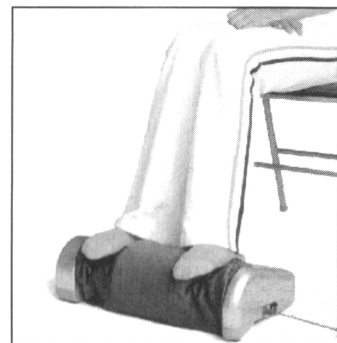

Stopala

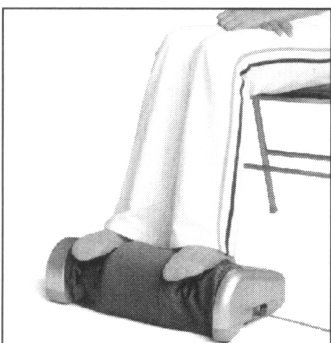

Masaža

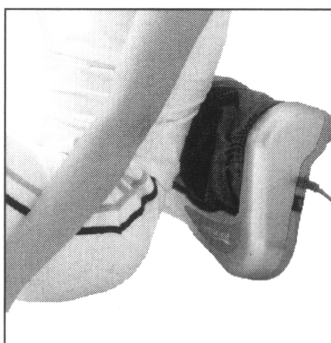

Gnječenje

OTKLANJANJE PROBLEMA

Sledeći primeri ukazuju na probleme koji se najčešće javljaju i moguće uzroke. Ukoliko masažer i dalje ne radi, isključite ga i izvucite utikač iz zida. Konsultujte dobavljača ili odnesite masažer kod ovlašćenog servisera radi popravke. Nemojte sami popravljati masažer ili menjati oštećene delove.

Problem	Mogući uzrok
Masažer proizvodi zvukove prilikom rada. Čuje se neki zvuk prilikom promene smera. Čuje se zvuk valjaka koji se taru o tkaninu.	Normalno je da se prilikom rada čuju takvi zvuci. Nije u pitanju kvar masažera.
Masažer ne radi.	Proverite da li je utikač dobro nalegao u utičnicu u zidu. Proverite da li je prekidač u položaju "ON". Proverite da li je daljinski upravljač dobro nalegao na svoje mesto na masažeru.
Nakon 15 minuta, masažer je prestao sa radom.	U pitanju je funkcija automatskog tajmera a ne kvar masažera.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

- Uvek izvucite utikač iz zida pre čišćenja masažera.
- Ne koristite razređivače ili slična abrazivna sredstva za čišćenje masažera.
- Za čišćenje upotrebljavajte blago navlaženu krpu.
- Masažer je konstruisan tako da bude jednostavan za održavanje. Nije potrebno da se periodično podmazuje ili servisira.
- Ukoliko nećete koristiti ovaj masažer određeno vreme, izvucite utikač iz utičnice u zidu i spakujte ga, najbolje u originalnu ambalažu, kako prašina, dlačice i slično ne bi zapušilo ventilacione otvore. Takođe, savetujemo da ga odložite na mesto koje nema vlage ili prašine.
- Nemojte ostavljati masažer na direktnom sunčevom svetlu, blizu grejnih tela ili otvorenog plamena.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Model :	RT-Q030
Radna voltaža :	220-240V ~
Radna frekvencija:	50/60 Hz
Potrošnja :	25 W